

KAVO UNIQA

Den nye kompakte
premiumklassen



YOUNIQUE–tilpasset deg

Dagens tannklinikker er mye mer enn et sted for tannbehandling.

De er et uttrykk for tannlegenes individualitet – designet, utstyret og konsultasjonene og behandlingene som klinikken utfører gir klinikken sin unike signatur. Behandlingsrommene er også et uttrykk for tannlegens ideer om balanse mellom arbeid og fritid, effektivitet og nytelse.


Dagens pasienter forventer mer enn før – de vil føle seg forstått, komfortable og trygge.

KaVo uniQa er senteret i klinikken og oppfyller disse kravene med presisjon – både teknisk og følelsesmessig. De smarte funksjonene og KaVos velkjente presisjon og høye kvalitet gjør det mulig å gjennomføre vellykkede behandlinger på lang sikt. Samtidig gir KaVo uniQa nok plass til tannlegens eget unike uttrykk.

KaVo uniQa – der "Dental Excellence" møter individet.

KaVo I DEN VAKRESTE AV FORMER

Design, presisjon, teknologi og brukervennlighet ned til minste detalj – den nye KaVo-standard er unik.

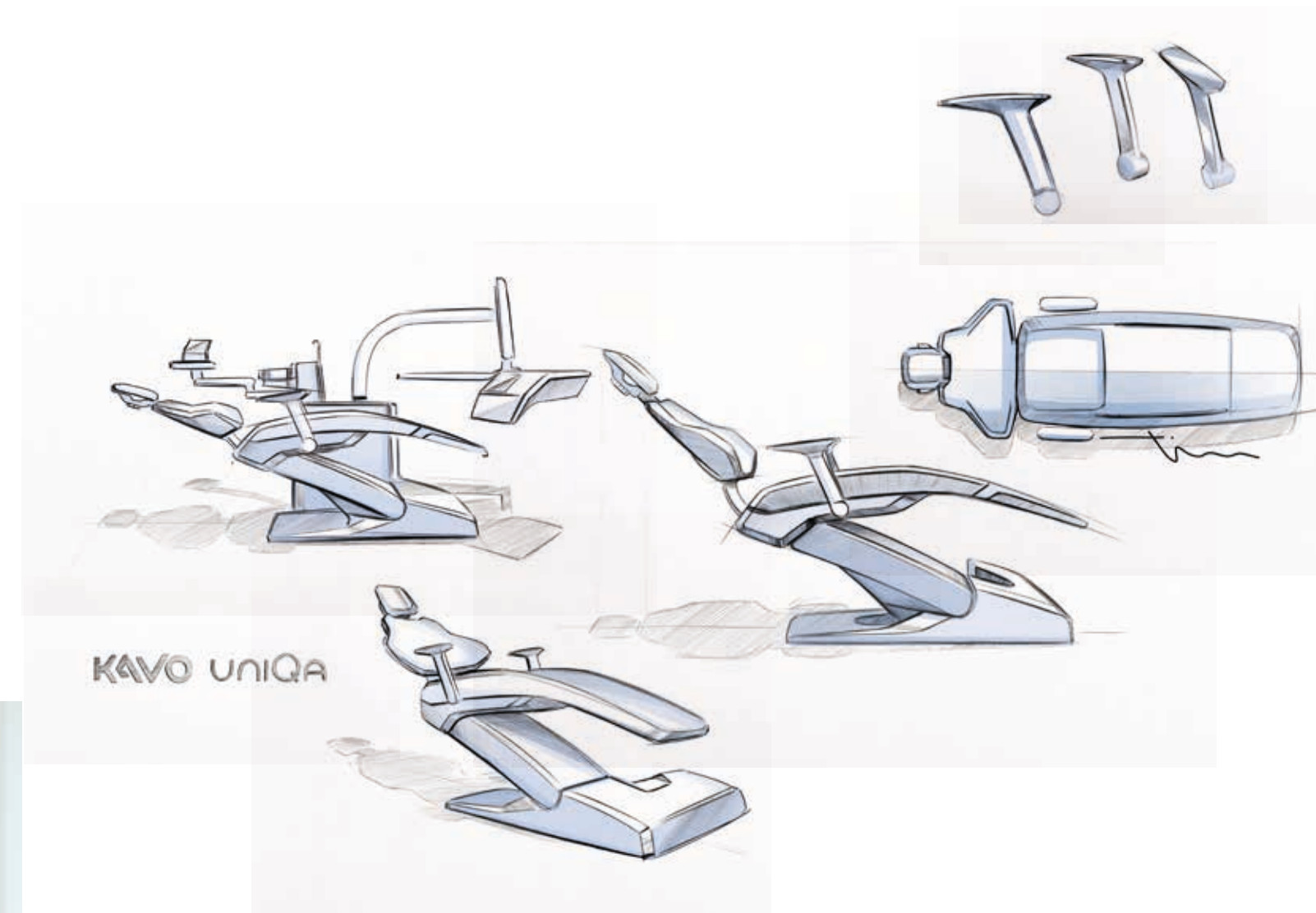

Intelligente, unike produkter kan bare lages med klare mål, sterk vilje, konsekvent fokus og en stor dose lagånd. Produkter som oppfyller kravene til moderne tannklinikker. Produkter som inspirerer til glede. Produkter som den nye KaVo uniQa.

Armin Imhof, Chief Technical Officer i KaVo, og Jürgen Hinderhofer, designer og administrerende direktør i SLOGDESIGN, diskuterer hva som gjør den nye KaVo uniQa unik – og gir et spennende innblikk bak kulissene i utviklings- og designarbeidet.



Hva tror du gjør den nye KaVo uniQa til en "ekte" KaVo behandlingsenhet?

Armin Imhof (AI): Først og fremst representerer KaVo presisjon, brukervennlighet, rimelighet, pålitelighet og selvfølgelig en viss grad av digitalisering. Et KaVo-produkt er arbeidsutstyr på høyeste nivå – noe har vi lagt vekt på med vår nye KaVo uniQa behandlingsenhet.

Navnet uniQa bringer tankene til noe som er unikt og umiskjennelig spesielt. Hvilke aspekter vil du fremheve i denne sammenhengen?

AI: Med uniQa samler vi premiumnivået med mellomprissegmentet. Tidligere var funksjonene til vår nye behandlingsenhet kun tilgjengelig i det høyere prissegmentet. Under utviklingen har vi fokusert på fire områder: pasientstolen, hygienefunksjonene, berøringskontrollene og selvfølgelig designet. Det er i stor grad disse fire aspektene som gir uniQa dens umiskjennelige karakter. Og selvfølgelig var den typiske KaVo-arbeidsflyten også en del av vårt fokus, da vi bestreber oss på å unngå at tannleger må gjøre unødvendige endringer i kjente og velfungerende prosesser.

Jürgen Hinderhofer (JH): På designnivå ønsket vi først og fremst å tilby flere funksjoner i et mer kompakt miljø. For eksempel er mange komponenter avrundet, noe som reduserer bulk og gir mer presise kanter. Det gir produktet et unikt utseende og den velkjente KaVo-presisjonen.

AI: I store trekk kan vi si at til tross for de mange tekniske funksjonene, har vi utviklet et intuitivt, intelligent og brukervennlig konsept og kombinert det med høykvalitetsdesign og et tydelig, kompakt formspråk. Og i prosessen ble førsteklasses funksjoner og utprøvde systemer smart kombinert med nye funksjoner og ideer. Sluttproduktet er rett og slett unikt – både fra et teknisk og designmessig perspektiv.

Tid er en verdifull vare – og det gjelder også tannklinikker. En effektiv arbeidsflyt og god brukervennlighet er viktige kriterier for en behandlingsenhet. Hvordan jobber du med disse aspektene på KaVo?

AI: I KaVo ser vi det som vårt ansvar å finne smarte løsninger som møter våre kunders behov for effektivitet. Vi følger nøye med på hvordan klinikkenes team jobber og prøver å gjøre livet enklere for alle som bruker enhetene våre. Et eksempel er de magnetiske lukkingene som brukes ved innføring av væsker for hygienerutiner: uniQa har et magnetisk system som sentrerer og lukker dører. Dette er funksjoner som ikke bare gjør prosessen enklere og raskere, men som også er morsomme å bruke. Og til syvende og sist er det slike små detaljer som betyr mest.

JH: La oss ikke overse hygieneaspektene – å unngå skjøter eller vanskelige kanter holder designteamet opptatt gjennom hele prosessen. Til syvende og sist er det alltid summen av alle veldesignede detaljer som resulterer i et vellykket, harmonisk helhetsbilde. Det er også en del av kvaliteten.



ARMIN RETTEN

” Sluttproduktet er rett og slett unikt – både fra en teknisk og designperspektiv. “

Du nevner kvalitet. Hva er god kvalitet fra ditt synspunkt og hvordan gjenspeiles det i KaVo uniQa?

JH: I tillegg til brukervennlighet, hygiene og de tekniske egenskapene vi allerede har nevnt, betyr også hvordan produktene føles. Hvordan føles for eksempel overflatene eller instrumentene når jeg løfter dem ut av holderen? Hvordan føles overflatene? uniQa-overflater er ikke kalde og ubehagelige, men varme og fløyelsmyke å ta på. Når det kommer til hvordan produktene oppfattes, merkes den høye kvaliteten i ordets rette forstand.

Når det gjelder valg av materialer, kombineres funksjonalitet og lang levetid med verdi og design. Uniten må også være laget av et materiale som er ripebestandig, kjemikaliebestandig og UV-bestendig for å unngå gulning.



JÜRGEN HINDERHOFER

” Faktisk krever holdbare produkter med lang levetid materialer av eksepsjonelt høy kvalitet. Det er nøkkelen til å skape KaVo-kvalitet ned til minste detalj.

“

Kvaliteten på materialene under er også viktig – her har vi for eksempel brukt høykvalitets støpte aluminiumsdeler.

AZ: Det stemmer. Lang levetid og presisjon er resultatet av et høykvalitetsprodukt. Den lange levetiden sikrer et enestående pris-ytelse-forhold og så få driftsstopp som mulig. Presisjon gjør det daglige arbeidet enklere, fordi pålitelige funksjoner er viktige når arbeidstrinn gjentas hundrevis av ganger om dagen. Arbeidsflyten og dens ergonomi må også være enkel og pålitelig. En behandlingsenhet kan brukes i en tannklinikk i opptil 20 år – og vi ønsker at den skal være enkel å bruke hver dag samtidig som den oppfyller teamets høye forventninger.

Det blir stadig viktigere å kunne tilpasse enheter. I hvilken grad påvirker kravet om tilpasningsevne designet?

JH: Designet kan enkelt tilpasses ulike individer, også når det kommer til farge. Farge er et viktig designelement og påvirker stemningen i et rom. Varmeroner har en annen effekt enn kalde toner eller pasteller.

Vi er i økende grad klar over at konsistente fargekonsepter implementeres i tannklinikker eller at ulike rom har ulike fargetemaer som skiller dem. Det er mange forskjellige måter å implementere egne ideer og ønsker på. Men en KaVo uniQa passer alltid inn og kan visuelt tilpasses med valg av trekk eller farge.

AZ: Det er akkurat det som er poenget. Stadig flere tannleger utvikler et gjennomtenkt konsept for sin virksomhet og behandlingsenhetene må integreres i disse konseptene. Det kan være fargekonsepter, men også spesifikke temaer som «ro» eller «natur». uniQa symboliserer det unike og individualiteten til hver enkelt tannlege – fysikk og arbeidsmåte er forskjellig fra person til person. Det er derfor mulig å konfigurere uniQa på mange forskjellige måter. Som premiumprodusent skal vi tilby passende produkter som oppfyller kravene til dagens tannpleie.

ARMIN RETTEN

” Som en premium produsent må vi tilbyr passende produkter som oppfyller dagens krav tannpleiestillinger.

“



JÜRGEN HINDERHOFER

” God design er kompromissløs, diskret, ærlig og gjennomtenkt ned til minste detalj. Pasienter vil alltid legge merke til detaljene.

“



Fokus flyttes også i økende grad til pasienten. Hvordan fungerer utformingen av en behandlingsenhet pasienten?

JH: God design er kompromissløs, diskret, ærlig og gjennomtenkt ned til minste detalj. Pasienten vil alltid legge merke til detaljene. KaVo uniQa er behagelig og betryggende. Det konsekvente, klare designet vil mest sannsynlig ha en slags effekt på de som kommer i kontakt med det.

AZ: Det er akkurat det det handler om. Det handler om å ta et veldig komplekst produkt med tusenvis av funksjoner og gi det et enkelt, nedstrippet utseende. Slik at det ser mer ut som et møbel. Pasientstolen ser veldig elegant ut

og minimalistisk utseende – for eksempel har den ingen påskrudde deler, men har likevel utallige funksjoner. Og det var målet – ikke å avskrekke med et overdrevent praktisk design, men å skape velvære med det visuelle utseendet.

Til slutt, hvis du måtte beskrive KaVo uniQa i ikke mer enn tre setninger, hvordan ville det høres ut?

AZ: Enestående ergonomi i sin vakreste form oppsummerer enheten for meg: KaVo uniQa er et førsteklasses verktøy med enestående design. For meg er disse to egenskapene, ergonomi og design, også de viktigste kjennetegnene til en behandlingsenhet fra KaVo.



KaVo uniQa – fordelene:

Pasientstolen – ergonomisk perfektionert

1. En moderne, inspirerende og kompakt stoldesign med fokus på ergonomi.
2. En høyeste posisjon på 830 mm og en laveste posisjon på 350 mm.
3. Integrert Trendelenburg-bevegelse for pasientene.
4. Armlener på begge sider for enkel inn- og utstigning.
5. Maksimal pasientvekt på 185 kg.

Dentalenheten – rørende enkel

6. Intuitiv bruk med rask og direkte tilgang til alle viktige funksjoner for tidsbesparende og sømløse behandlingsprosesser.
7. Fire versjoner: fra de kompakte TM-bryggene, S-bryggene og vognvariantene, som også passer for venstrehendte brukere, til den enda mer elegante og ergonomiske T-bryggen for høyrehendte.

Pasientkommunikasjon – tydelig display

8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: et intraoralt 3-i-1-kamera for utmerket kariesdiagnostikk i full HD.
9. Høyoppløselige skjermer: KaVo Screen HD på 22 tommer og KaVo Screen One på 19 tommer.
10. CONEXIO: Datagrensesnitt for tilgang til pasientdata direkte på behandlingseenheten.
11. Enkel og nettverksuavhengig pasientkommunikasjon med den selvforsynte versjonen av KaVo CONNECTbase.

Hygiene – effektivt automatisert

12. Praktiske hygienerutiner: integrerte skylleprogrammer, DEKAmat og OXYmat og hygieneenheten med integrert avtagbar adapter for instrumenter og sugeslanger for tidsbesparende, automatisk rengjøring og desinfeksjon.

Fullt integrerte endodontiske og kirurgiske funksjoner

13. Endodontiske funksjoner med tre forskjellige moduser for filkontroll og en utvidbar fildatabase med nesten 200 forhåndsinnstilte filer.
14. Kirurgisk funksjon: en liten og lett kirurgisk motor og en integrert saltvannspumpe.

Tilbehør – smarte kombinasjoner

15. Optimal behandlingskomfort med KaVoLUX 540 LED takket være naturlig lys og et jevnt lysfelt.



INTUITIVE FUNKSJONER



Finn funksjoner enkelt og raskt med det intuitive brukergrensesnittet på dentalenhetens høykvalitets berøringsskjerm i glass. Du kan se frem til en jevn, rask og enkel arbeidsflyt.

Mer frihet – for mer individualitet

Universelle løsninger hører fortiden til – Behandlingsenheten din skal være like unik som du er. Skreddersy ditt KaVo uniQa utstyr til dine egne krav og ned til minste detalj. Takket være den fleksible instrumenteringen kan det gjøres på et øyeblikk: utstyr tann- og pleieenheten slik at den passer deg og teamets spesifikke ønsker. Mange funksjoner kan tilpasses etter brukeren, som navn, behandlingstyper og direkteknappene på startskjermen.

Og hvis behandlingsfokuset ditt skulle endre seg, er det ikke noe problem.

Justeringer kan gjøres når som helst. Mulige endringer kan for eksempel være en oppgradering fra fem til seks stativer eller ettermontering av endodontiske og kirurgiske funksjoner.

mer praktisk – mer brukervennlig

Arbeid jevnere – ved hjelp av berøringsskjermen eller fotkontrollen kan du enkelt få tilgang til alle funksjoner eller parametere på de integrerte spesialenhetene under behandlinger. Du kan alltid se all informasjon på tannlegeenheten. Du kan også programmere tilpassede behandlingsprosesser når som helst. Finn en posisjon for tannlegeenheten

som er praktisk for deg. Sittende eller stående. Alene eller med hjelp. Med brygge, tralle eller svingarm. På den måten har du alltid alt innen rekkevidde.

Flere tilkoblingsmuligheter rettigheter – for mer fleksibilitet

Ved hjelp av USB-grensesnittene kan du enkelt koble til ekstra enheter når du vil. På noen få sekunder gjenkjenner behandlingssystemet uniQa automatisk hva det er du har koblet til. Så du kan lene deg tilbake og omfavne fremtiden.



UniQa brukergrensesnitt i tre ord: oversiktlig, hygienisk, effektiv

Alt er på rett plass

Uansett om du bruker fem eller seks instrument, kan hver posisjon enkelt konfigureres etter dine ønsker. Eller du kan ganske enkelt oppgradere fra fem til seks stativer på et senere tidspunkt. Det er enkelt med den nye KaVo uniQa.

Alt er lagret på ett og samme sted

Smart datalagring: du kan raskt og pålitelig hente lagrede parametere for opptil fem behandlingstyper for hvert instrument. For opptil seks utøvere – KaVo uniQa gjør det mulig.



Alt er innen rekkevidde

Noen ganger er det nødvendig med en oppgradering – med T-versjonen får komfort og bekvemmelighet en helt ny betydning ettersom håndtering og tilgjengelighet av tannheten blir enda enklere med T-bryggen for høyrehendte brukere. Det store brettet har mer oppbevaringsplass og håndtaket på dentalenheten er avtagbart og finnes også i en steriliserbar versjon. KaVo uniQa gir deg et helt nytt nivå av bekvemmelighet.

Alt er innen synsvidde

Rask og enkel bruk takket være den intuitive berøringsskjermen: når du løfter et instrument, får du raskt oversikt over all viktig informasjon. Så du kan holde fokus.

Smarte spesialfunksjoner – ikke bare for spesialister



Det er innsiden som teller – den endodontiske funksjonen

De integrerte endodontiske funksjonene gjør at du ikke trenger å kjøpe en dyr endodontienhet. Med tre forskjellige moduser for filkontroll og den integrerte fildatabasen med nesten 200 forhåndsinnstilte filer, kan du konfigurere, hente og lagre alle viktige parametere, som konvertering av målte verdier og dreiemoment, direkte på dentalenheten. Du kan legge til nye filer når som helst. Dette er en endodontisk pakke som er gjennomtenkt fra A til Å.



En lys idé - det smarte kirurgiske alternativet

Velger du i tillegg å utstyre KaVo uniQa med KaVo INTRA LUX S600 LED, får du ubegrenset tilgang til alle funksjonene til et moderne kirurgisk apparat i kombinasjon med KaVo kirurgiske instrumenter og saltvannspumpen som er integrert på dentalenheten. Noe som gjør arbeidet ditt enklere.



Det er så kraftfullt en lys kan være - den kirurgiske motoren S600 LED

Den kirurgiske motoren KaVo S600 LED har alt. Den er 28% lettere og 20% kortere enn sin forgjenger - det er en av de letteste og minste kirurgiske motorene på dentalmarkedet. Mye kraft i en liten forpakning.

Holistisk design – integrertsaltvannspumpe

Effektiv avlastning og komfort under kirurgiske behandlinger - saltløsningspumpen er integrert i uniten og holderen for saltvannsløsning gjør det mulig. Det er 360° av kirurgisk funktionalitet.



TENK PÅ HOLDNINGEN



Forebygg helseproblemer og smerter med KaVo uniQa. Utøv din kunst med minst mulig stress og med god holdning. Opplev friheten til naturlige, intuitive prosesser og la pasientene dine alltid være komfortable og avslappede.

Det er ingenting viktigere enn helse.



En laveste posisjon på 350 mm og en høyeste posisjon på 830 mm



Arbeid i riktig høyde

Kavo uniQa er like fleksibel som du er unik. Du kan ikke bare tilpasse uniQa etter personlige ønsker og vaner, men også etter høyden din. Høyden på pasientstolen kan justeres mellom 350 mm og 830 mm, som muliggjør optimal ergonomi uansett om du utfører behandlinger sittende eller stående. Alt for at du skal kunne gjøre ditt beste.

Nyt din nyvunne frihet

Nå kan du bevege deg mer fritt med mer benplass. All plass du trenger er under KaVo uniQa pasientstolen. Du kan også plassere fotkontrollen der den passer deg – pasientstolens kompakte design og trinnplate gjør dette mulig. For ergonomiske stillinger og enkel tilgang til pasientene dine. For den fantastiske følelsen av frihet.



Den beste posisjonen noensinne

KaVo uniQas pasientposisjonering i henhold til Trendelenburg er både komfortabel og ergonomisk i enhver behandlingsposisjon: Fotstøtten vinkles og heves automatisk for å matche helningen på ryggstøtten. Den kombinerte bevegelsen forhindrer kompresjon eller forlengelse av pasientens rygg når ryggstøtten justeres. Den forhøyede benstillingen letter sirkulasjonen. Pasienten er dermed bokstavelig talt alltid i den beste posisjonen.



Kom deg opp og ned – men ta det med ro

Armlenene på KaVo uniQa kan enkelt svinges nedover, noe som gjør det lettere å komme inn og ut av stolen. Samtidig gir de støtte og beskyttelse under behandlingen uten at du som tannlege trenger å begrense bevegelsesfriheten. Dette betyr optimal komfort for deg og din pasient fra nå av.

Perfekt plassert

Avhengig av indikasjon eller pasientstørrelse er det mulig å finne den perfekte posisjonen med den fleksible vendbare polstringen og den to-leddede hodestøtten, slik at pasientene dine kan ligge i en optimal posisjon og du kan jobbe i en avslappet og ergonomisk holdning som fremmer konsentrasjon. Bra for deg. Bra for pasientene dine.

Alt sitter i hodet

Du kan bruke den trinnløst justerbare vippevinkelen til hodestøtten til å justere hodestøtten og dermed posisjonen til pasientens hode og munn. Pasientene dine ligger helt avslappet på den komfortable hodeputen og du har konstant og optimal tilgang til arbeidsområdet. Fordi komfort starter med hodet.



Optimalisert ryggstøtte: for en optimal arbeidsstilling og tilgang til pasientens munn.



Alt er innen rekkevidde: en toleddet hodestøtte med trykknapp og en svingbar hodepute som er enkle å justere.

Venstre eller høyre? Det spiller ingen rolle!




KaVo uniQa står for individualitet og fleksibilitet, så den er selvfølgelig tilgjengelig i to varianter – en for venstrehendte og en for høyrehendte. Uansett hva du bestemmer deg for i dag, kan du alltid ombestemme deg senere. Det er investeringssikkerhet å la KaVo.

Ergonomisk fra topp til tå

Hver bevegelse er perfekt

Opplev hvor godt det føles å kunne jobbe i en enda mer avslappet atmosfære med perfekte avstander til instrumentene. Enten du jobber alene eller sammen med sykepleier, kan alle versjoner av tannhelseenheten

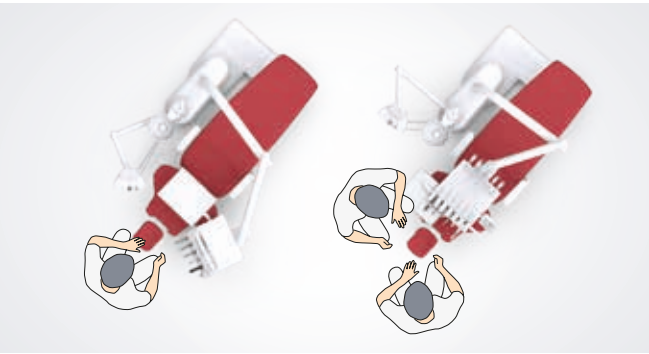

samt brettholderen og pleieenheten kan plasseres etter dine ønsker takket være det store bevegelsesområdet. Den maksimale forlengelseslengden på instrumentslangene på 90 cm og den lave bryggehøyden på 45 cm gir mange behandlingsmuligheter med svingarmsversjonen.



Din sykepleier har alt innen rekkevidde

KaVo uniQa er utstyrt med en kapasitiv berøringsskjerm og et oversiktlig brukergrensesnitt. Alle sentrale funksjoner for stolen, hygieneprosessene og driftsbelysningen er enkle å nå. Instrumenter kan plasseres enkelt og presist etter brukerens vaner og ønsker. Det avtakbare instrumentbrettet sikrer optimal hygiene. I tillegg gjør den fleksible høydejusteringen og det store snuområdet pleieenheten til en ergonomisk suksess.



Den perfekte fotkontrollen

Har du hendene fulle under behandlingen? Det er ingen problemer med KaVo uniQa. Nå kan du enkelt kontrollere alle funksjoner og integrerte enheter med foten. Dette gjelder også CONEXIO-systemprogramvaren. Det reduserer også risikoen for krysskontaminering. Det finnes også en trådløs versjon for enda mer fleksibel plassering. For at du skal ha full kontroll.



Et effektivt arbeid betyr én ting: kortest mulig

Det sentrale utgangspunktet

Grunnlaget for din optimale arbeidsflyt Centro. Alle viktige enheter er praktiske og på ett sted - slik at det smarte systemet blir for dine behandlingsprosesser, gripestier og bevegelsesbaner. Kortdistanseprinsippet gjør at du alltid er innen rekkevidde. Når du endrer og oppgraderer og fremtidige teknologier, vil du kjenne fleksibilitet. Takket være ulike adaptere kan en skiftes raskt og enkelt. For du mener optimal arbeidsflyt med KaVo uniQa - for hva kan være bedre enn følelsen av å ha alt under kontroll?



Kan utstyres for tilpasset arbeid – støttesystemet KaVo Centro



Intraorale røntgenbilder er alltid innen rekkevidde

Installer enkelt et passende intraoralt røntgen på lamperøret med en adapter og du kan ta røntgenbilder ved uniten.


OPTIMAL PASIENT-KOMMUNIKASJON NÆR FOR HÅNDEN



Vis pasientene hvorfor visse behandlinger er nødvendig
høyoppløselige bildefunn og fantastisk fargegjengivelse.

KaVo ERGOcam One – lite kamera, virkelig stor effekt

Hjelp pasientene dine til å forstå tannhelsen deres med bilder som har stor dybdeskarpheit og utmerket fargegjengivelse. Med den brukervennlige KaVo ERGOcam One kan du ta perfekte bilder når som helst. Kameraet gjør det mulig å vise et skarpt bilde på en avstand på 10-25 mm. Avtrekkeren kan frigjøres for hånd eller med fotkontrollen.

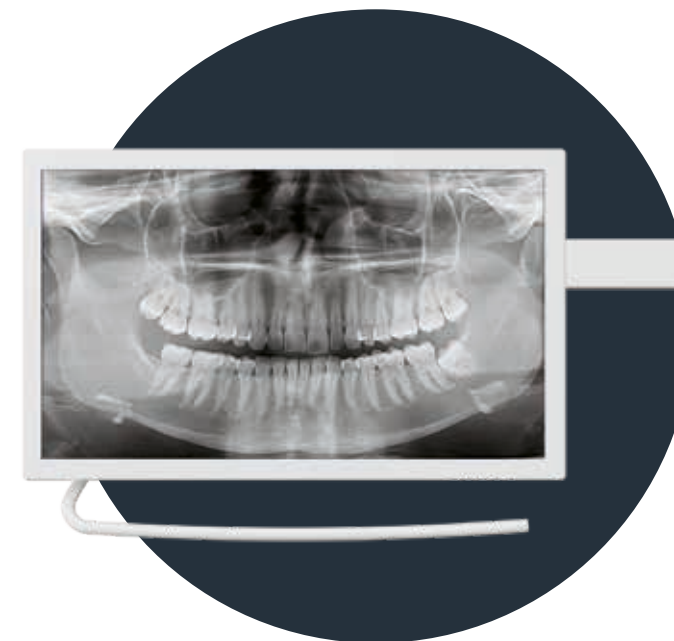

Vis pasientene hva du ser

Imponer med skarpe bilder. KaVo-skjermene har funksjoner som høyoppløselig bildekvalitet, høye kontrastverdier og fantastisk fargegjengivelse. De er optimalt tilpasset funksjonene til bildeenheter, som kameraer og mikroskoper. Skjermen har en beskyttende glassrute, små hull på kabinettet og kan justeres med en enkel håndbevegelse for høy hygiene. Et enkelt valg når du vil fokusere!

KaVo Screen HD – det perfekte valget i full HD

- Flatskjerm med full ekte HD
- Høyde-breddeforhold: 16:9
- Skjermdiagonal: 22 tommer
- To digitale innganger for mikroskop og PC

KaVo Screen One – en høykvalitetsversjon med HD

- Flatskjerm med ekte HD
- Høyde-breddeforhold: 16:9
- Skjermdiagonal: 19 tommer
- To digitale innganger for mikroskop og PC

DIAGNOcam Vision Full HD – innovasjon i den vakreste form

Se for deg et kamera som gir deg tre klinisk relevante bilder for kariesdiagnose – bildene er alltid skarpe og leveres på mindre enn ett sekund. Nå er det mulig – med DIAGNOcam Vision Full HD.

Trippel diagnostikk med ett klikk
Enten intraorale, gjennomlysende eller fluorescerende bilder: DIAGNOcam Vision Full HD har kombinert alt i én enhet.

Betjening med tilpassbare berøringspaneler
De to berøringspanelene over og under kameraet gjør det enkelt å ta bilder av over- og underkjeven. I tillegg kan funksjonene tilpasses din måte å jobbe på og for å passe venstre- eller høyrehendte.


Lett som en fjær og perfekt balansert
Kameraets lave vekt og perfekte balanse gjør at du kan jobbe i en ergonomisk og avslappende stilling.

Bildemoduser som kan kombineres
Du velger selv om du vil ta et intraoralt bilde, translucensbilde eller fluorescensbilde – eller om du vil kombinere to eller tre eksponeringsmodi.

Alle bilder er i full HD
Takket være HD-oppløsningen på 1920 x 1080 piksler vil alle bilder som tas ha en enestående skarphet.

Ta bilder på en måte som passer deg
Som et alternativ til berøringspanelet eller PC-musen kan du også ta bilder med fotkontrollen (valgfritt).

3-i-1

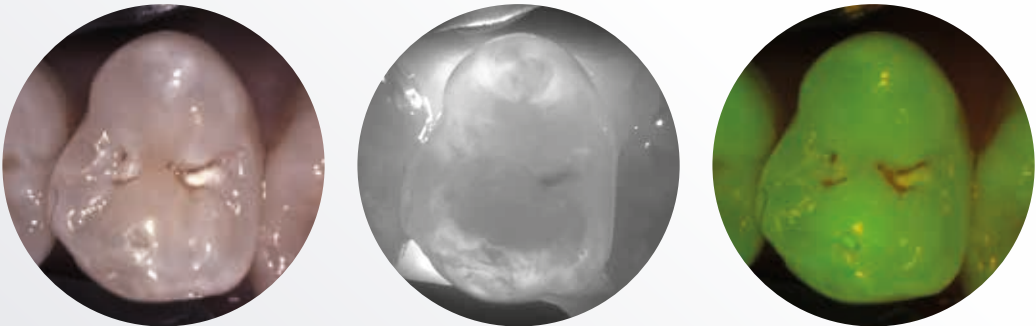

Se mer, vis alt: få en tre-i-ett-diagnose ved å trykke på en knapp
Intraorale bilder for den første visuelle kariesdiagnosen, dyp innsikt i tannstrukturen med gjennomlysningsteknologi og fluorescensbilder - alt med bare ett enkelt bilde i sanntid og i full HD-oppløsning på skjermen.

Ett tips for hele arbeidsflyten
Du kan også bruke spissen for gjennomskinnelige bilder for alle andre eksponeringsmoduser. Takket være spissens patenterte design, vil du ikke lenger kaste bort tid på å bytte tilbehør mellom bildene.

Brukervennlighet
Den integrerte LED-belysningen viser statusen til kameraet: hvit for "i drift", blå for "standby" og rød for "feil".

Permanent autofokus



Jochen Kania
Tannlege

«Mange kameraer har en autofokussfunksjon. Men det tar vanligvis for lang tid å fokusere godt nok til å få et klinisk relevant bilde. Den permanente autofokussfunksjonen til DIAGNOcam Vision Full HD skiller seg ut fra mengden. Den er alltid på – uten at du trenger å trykke på en knapp. Den er automatisk fokusert hele tiden – jeg får et skarpt bilde umiddelbart, uten å måtte vente.

Resultatet er fantastisk: det er nesten umulig å ta et bilde som ikke er helt skarpt – i full HD-kvalitet. Og dette gjelder uansett om DIAGNOcam Vision Full HD brukes som et intraoralt kamera, for gjennomskinnelige bilder eller i fluorescensmodus – eller om alle tre modusene er kombinert i ett og samme bilde.»



Den nye pasientkommunikasjonsenheten – integrert, enkelt og effektivt

KaVo CONNECTbase har en innovativ og enkel arbeidsflyt for pasientkommunikasjon – du kan bruke KaVo CONNECTbase til å informere pasientene om deres tannhelse på KaVo uniQa uten å måtte installere ekstra programvare. Bare koble til kameraet og kom i gang med en gang. Bildene vises direkte på behandlingsenhetens skjerm og kan sammenlignes med tidligere lagrede bilder.




Plug-and-play –

fleksible prosesser på en enkel måte Kameraene på KaVo uniQa-enheten gir deg umiddelbar tilgang til kamerabildene dine og muligheten til å eksportere dem via USB.

Det er minst like enkelt å bruke behandlingsenhetens berøringsskjerm og fotkontroll, noe som gjør at du ikke trenger å forlate arbeidsplassen under behandlingen eller avbryte en prosess unødvendig.




Vil du også bruke andre kilder? Ikke noe problem. Bruk en enkel funksjon direkte på uniQa tannlegeenhet for å vise ulike HDMI-kilder på behandlingsenhetens skjerm.

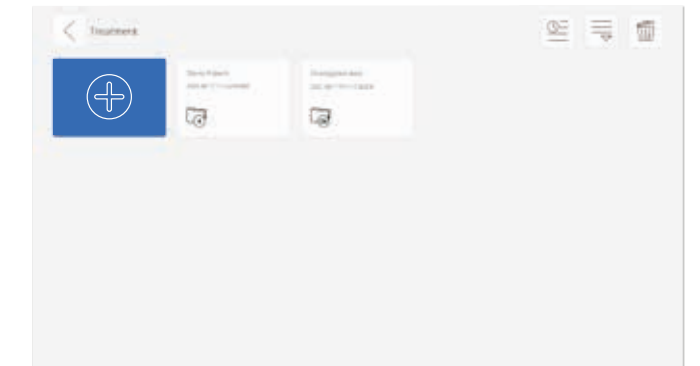


Gjør behandlingene til opplevelser

Du kan gjøre ventetidene mer behagelige og om nødvendig skape en innbydende distraksjon for pasienter med visuell underholdning direkte på KaVo uniQa behandlingsenheten. Et stort utvalg av medier, inkludert en tilpassbar velkomstskjerm eller skjermsparer med et stort utvalg av

bilder eller lysbildeframvisninger, vil appellere til både yngre og eldre pasienter. Du kan selvfølgelig også bruke skjermen til å vise ditt eget materiale eller dele relevant informasjon – i ekte KaVo uniQa-ånd.

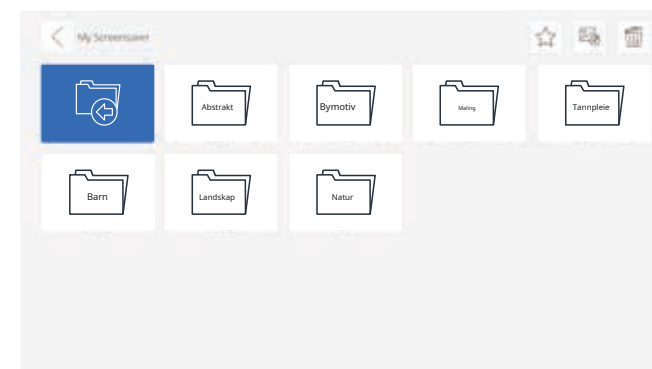

*Du kan bruke forskjellige
skjermbakgrunnstemaer for å
matche klinikkens design.*

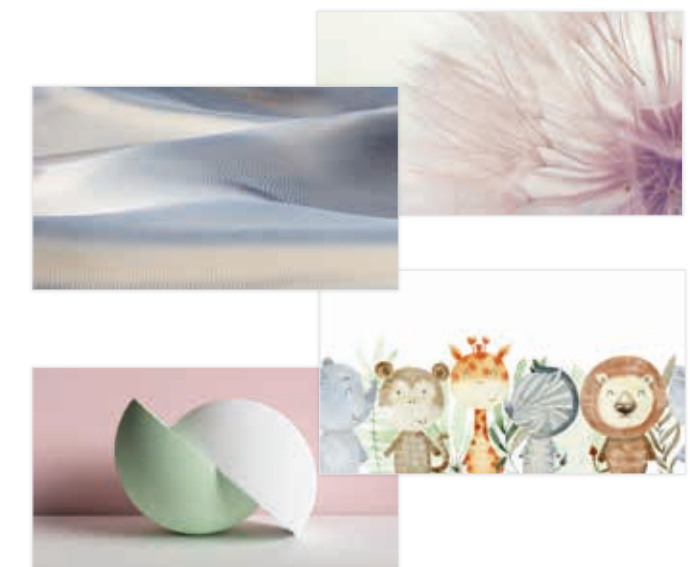



CONEXIO kobler til det som hører sammen

En unik KaVo-filosofi gjør det mulig: CONEXIO baner vei for mer effektive arbeidsmetoder. KaVo-programvaren kombinerer programvare for pasientbehandling, 2D røntgenbildearkiv, intraorale levende bilder og et raskt og intuitivt grensesnitt. Få tilgang til alle pasientdata direkte på berøringsskjermen til KaVo uniQa. Vil du legge til mer data? Ikke noe problem. Og best av alt: opplysningene legges direkte til pasientens journal.

Forenkler dine diagnoser –
informerer pasienten din
Bruk alternativet for å velge og sammenligne bilder fra forskjellige kilder. Alt du trenger for å vise pasienten bildene er dentalenheten på KaVo uniQa – ingen tastatur, mus, nettbrett eller PC.



En perfekt oversikt:
den kliniske overvåkingsstatusen
Hvert bilde kan tildeles en tann når deteksjonene registreres. Du kan angi en klinisk overvåkingsstatus fra "sunn" til "kritisk". Sammenligningsmodusen gjør det mulig å utføre en fremdriftssjekk med eldre bilder av tannen eller bilder fra andre kilder mens diagnosen fortsatt pågår.

Et godt behandlingskonsept
Med CONEXIO er alt akkurat der du trenger det: direkte på din KaVo uniQa tannlegeenhet. Det brukervennlige grensesnittet som du bruker via uniQa berøringsskjerm gir deg full tilgang til pasientmappen. Og hvis du ikke har én hånd fri, kan alle sentrale CONEXIO-funksjoner også styres og aktiveres med fotkontrollen. Veldig behagelig og hygienisk.



En sammenligning av KaVos pasientkommunikasjonssystem

	KaVo CONNECT base	KaVo CONEXIO
Produktinformasjon	Autonomt system – integrert i KaVo uniQa	Programvareinstallasjon på backend-datamaskinen
Er programvareinstallasjon på datamaskinen nødvendig?	Ingen	Ja
Automatisk integrasjon av klinikkens styringssystem	Nei (tilgjengelig på et senere tidspunkt)	Ja
Tannplaner og klinisk overvåkingsstatus	Ingen	Ja
Tilgang til innhold (f.eks. skjermspare, KaVo-temaer, velkomstskjerm)	Ja	Ingen
Skifte av kilde direkte på tannenheden til behandlingsenheten	Ja (2 x HDMI)	Ingen
Bildene vises direkte på behandlingsenhetens skjerm	Ja	Ja
Bildesammenlikninger med tidligere bilder	Ja	Ja
Automatisk bildeoverføring	Ja	Ja
Bruk	- Berøringsskjerm på dentalenheten - Behandlingsenhet fotkontroll	- Berøringsskjerm på dentalenheten - Behandlingsenhet fotkontroll - PC (mus, tastatur)
Kameraer	- KaVo ERGOcam One - KaVo DIAGNOcam - KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	- KaVo ERGOcam One - KaVo DIAGNOcam - KaVo DIAGNOcam Vision Full HD
Fjerntilgang + oppdatering av behandlingsenhet	Ja (LAN)	Ingen

ENKEL HYGIENE RUTINE



Håndtak, instrumentunderlag, fonteneskål og silikonmatter er lette å fjerne og desinfisere. Uniten er lukket for å forhindre smuss å komme inn i behandlerenheten. Sugefiltre kan enkelt byttes på en sikker måte takket være det hygieniske håndtaket.



Det er veldig enkelt å rengjøre KaVo uniQa: bare fjern de viktige komponenter for desinfeksjon. Alle overflater er enkle å rengjøre og spyling av instrumentene samt rengjøring og desinfeksjon av sugeslangene er automatisert, og holder deg trygg.

Sikker hygiene

Du kan stole på pålitelig, automatisk rengjøring og desinfisering av sug- og instrumentslanger. Hygieneenheten er integrert i KaVo uniQa. Du kan koble til både sugeslanger og instrumentslanger – veldig enkelt og med liten innsats. Hygieneenheten kan fjernes og termisk desinfiseres.

Vannets kraft

Rensing med kraften av vann. KaVo uniQa kombinerer det automatiske HYDROclean-programmet for enkel, automatisk rengjøring av amalgamavskilleren, sug- og dreneringssystemene med instrumentskylleprogrammene. Dette lar deg unngå nedetid og redusere kostnadene ved vedlikehold av behandlerenheten.




Bakteriene har ingen sjanse

Beskytt KaVo uniQs kabler mot forurensning. Vannblokken med fritt vanninntak oppfyller de strenge kravene i DVGW-standard. I tillegg sørger permanent bakteriereduksjon med KaVo OXYGENAL 6 for at ingen mikroorganismer spres ved normal bruk. Med det intensive bakteriereduksjonsprogrammet

("ukentlig" rengjøringsprogram) du beskytter ikke bare pasientene dine mot mikroorganismer som kan dannes når enheten ikke er i bruk, for eksempel i helger eller perioder når klinikken er stengt, men sikrer også at kjøle- og skyllevæskene er av best mulig kvalitet. Sikkerhet fremfor alt.

Automatiske spyleprogrammer i henhold til RKIs retningslinjer

Minimer risikoen i henhold til spesifikasjonene fra RKI – med de forhåndsprogrammerte rengjøringsprogrammene er represseringen av KaVo uniQa veldig enkel. Enten det er om morgenen, etter hver behandling, om kvelden eller en gang i uken. På fanen hygiene er det instruksjoner om hvordan du klargjør enheten. Da tar programmene seg av spyling og rengjøring.

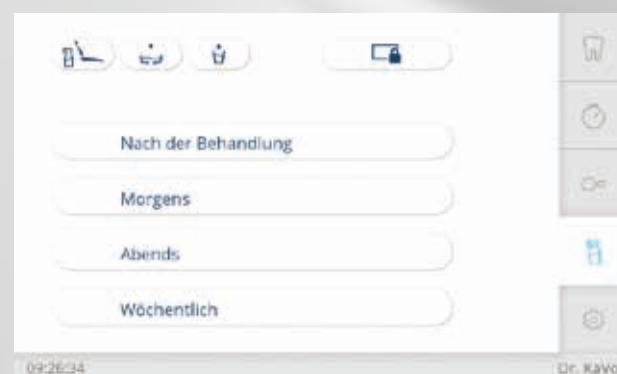

Beskyttet vannforsyningssystem

Instrumenter og motorer fra KaVo har en funksjon som hindrer gjensuging for å beskytte vannforsyningssystemet. Funksjonen forhindrer at forurenset sprayvann suges inn igjen i behandlingsenheten.



Spar tid med ferdigblandet KaVo DEKASEPTOL Gel. Gelen, som kan brukes direkte, fukter sugeslanger og systemer og fester seg til viktige områder i stedet for å bare spyles gjennom.



Ren glede

DEKAmat har en integrert DEKASEPTOL flaske for standardisert, effektiv rengjøring og bakteriereduksjon i sugekanalene. Den permanente og intensive reduksjonen av bakterier i pasientvannet med OXYmat fungerer like enkelt, fordi OXYGENAL 6-flasken også plassert i enheten. Det respektive middelet doseres automatisk i riktig dose. Det eliminerer den arbeidskrevende og tidkrevende manuelle behandlingen og risikoen for feildosering. I tillegg unngås kontakt med kjemikaliene.

ENESTESTÅENDE TILBEHØR OG UTSTYR



Gjør KaVo uniQa til et personlig og unikt verktøy. Kombiner tilbehør etter dine ønsker - for en individuell og morsom måte å jobbe på.



Kraft og ytelse i optimal balanse

Med PiezoLED ultrasonisk scaler kan tannrengjøring utføres med høy presisjon og på en tidsbesparende måte. Lineært oscillerende titan sonotroder sørger for spesielt effektiv behandling. Tenner og tannkjøtt forblir urørt selv i filigranområder, siden sirkulære lysutslipp gir deg optimal synlighet. Arbeid med ekstrem presisjon og uten å bli sliten takket være den lette, ergonomiske designen.

KaVo SONICflex er et smart verktøy som kan brukes til nesten alle indikasjoner. Takket være de forskjellige bruksområdene kan det bli et av dine mest brukte instrumenter: med mer enn 50 spisser som kan endres med en enkel vridningsbevegelse, er den perfekt for alle bruksområder, som profylaktiske behandlinger, endodonti, periodonti, minimalt invasiv kariesbehandling, kirurgi eller disseksjon.

Lev som du lærer

Når det kommer til instrumenter, bør du ikke nøye deg med annet enn det beste. KaVo MASTERmatic-serien dekker alle bruksområder, og gir deg best sikt og optimal tilgang til karies - slik at du kan behandle pasientene dine med høyeste kvalitet og presisjon, spesielt i kombinasjon med den ekstremt kompakte, lett og stillegående mikromotoren INTRA LUX KL 703 LED. Takket være SMARTdrive kan du jobbe effektivt ved 40 000 o/min uten å bli sliten.



Perfekt belysning for perfekt sikt

Bruk KaVoLUX 540 LED via den intuitive tannlegeenheten eller med kontaktløse håndbevegelser Du kan også aktivere og deaktivere KaVo uniQa med enhetens automatiske posisjoner. KaVoLUX 540 LED er optimalt tilpasset uniQa, er fullt kompatibel med hygienekrav og gir deg høyeste KaVo-kvalitet, lang levetid og maksimal behandlingseffektivitet



15.000 lux og optimalt arbeid

Et vanlig problem er at kompositt ofte herder for raskt dersom driftslyset ikke dimmes. Men det er ikke tilfelle med KaVoLUX 540 LED. Den innovative COMPOsave™-modusen (kompatibel med lysaktiverte restaureringsmaterialer) filtrerer ut alle blå komponenter i lyset, og bremser herdingen av det restaurerende materialet. På denne måten kan lysherdende materialer behandles sakte uten å dempe belysningen. Med en lysstyrke på 15 000 lux har du alltid optimal synlighet under behandlinger og får utmerkede resultater.

Naturlig lys av høyeste kvalitet



Kontaktløs bruk



COMPOsave-modus



Perfekt passform

For deg som tannlege er det spesielt viktig å jobbe i en ergonomisk, sunn og komfortabel stilling i enhver behandlingssituasjon. Ingenting påvirker holdningen din så mye som arbeidsstolen du sitter på hver dag. KaVo PHYSIO Evo og Evo F er designet for behov og arbeidsflyter til tannleger og sykepleiere.



Ergonomi og komfort ned til minste detalj

Takket være separate justeringsfunksjoner er det enkelt å tilpasse sete og ryggstøtte individuelt til deg og din behandlingsstil. Rygg- og seteputene til KaVo PHYSIO Evo er ergonomisk formet. Forhøyningen i midten av seteputene gir et stabilt sete og hindrer deg i å skli ved raske, korte rullebevegelser. Den avrundede lårstøtten gir mye bevegelsesfrihet. Den fjærende ryggstøtten gir konstant støtte til ryggmuskulaturen, spesielt i korsryggen, og holder deg dermed beskyttet til enhver tid. Myke arbeidsprosesser og størst mulig sittekomfort er en selvfølge for enhver behandling – for helsen din og et stressfritt arbeidsmiljø.

Et eksepsjonelt konsept

Behandlingsstolen KaVo PHYSIO Evo har fått kvalitetsstempel fra foreningen Healthy Back Campaign (AGR). Den uavhengige, tverrfaglige ekspertgruppen deler ut denne prisen basert på strenge ergonomi- og helsekriterier.





Utstyrsalternativer

	TM	S	C	T		TM	s	C	T
Pasientstol					Brettholder for brettstøtte	○	○	○	○
Myk pute	●	●	●	●	Kan svinges og heves og senkes	●	●	●	●
Mykt KaVo RELAXline-trekk	-	-	-	-	Avtakbar instrumentholder	●	●	●	●
					Valg av flis	●	●	●	●
Ryggstøtte					Kort arm	x	x	x	x
Tilt (optimalisert)	●	●	●	●					
					Enhet				
Nakkestøtte					Fontenebolle i porselen	●	●	●	●
2-leddet med dreibar sveiv	●	●	●	●	Fontenebolle i røykgrå glass	○	○	○	○
Toveis med trykknapp	○	○	○	○	Hygieneenhet	●	●	●	●
Komfortpute	○	○	○	○	Permanent bakteriereduksjon ¹	●	●	●	●
					Ekstremt nøyaktig bakteriereduksjon ¹	●	●	●	●
Armstøtte					HYDROclean (spylesystem)	●	●	●	●
Venstre	○	○	○	○	DEKAmat™ og OXYmat	●	●	●	●
Høyre	○	○	○	○	Varmtvannsbereeder	○	○	○	○
					VACU-stopp	●	●	●	●
Tannlegeenhet					Trådløs fotkontroll	○	○	○	○
Berørings skjerm	●	●	●	●					
SMART stasjon	●	●	●	●	Forsyningssystem				
Fem instrumentholdere	●	●	●	●	DVGW vannblokk	●	●	●	●
Seks instrumentholdere	○	○	○	○	DVGW vannflaske ²	○	○	○	○
Avtakbar instrumentholder	●	●	●	●	Kompakt vannblokk ²	○	○	○	○
Turbinslange	○	○	○	○	Enhetsport for tilbehør	○	○	○	○
INTRA LUX motor KL 703 LED™	○	○	○	○	Vakuumpkontrollventil	○	○	○	○
Integrert dreiemomentkontroll (endo)	○	○	○	○	SENTRAL mat	○	○	○	○
Ultralydskaleren PiezoLED™	○	○	○	○					
Skaleren SONICflex™	○	○	○	○	Avfallssystem				
Tre-funksjons sprøyte	●	●	●	●	Utvendig våtsuging	●	●	●	●
Flerbrukssprøyte	○	○	○	○	DÜRR amalgamseparator	○	○	○	○
Fysiologisk saltoppløsning	○	○	○	○	Automatisk DÜRR separator	○	○	○	○
Kirurgisk motor S600 LED	○	○	○	○					
Spray varme for instrumenter	○	○	○	○	Driftsbelysning				
USB-grensesnitt	○	○	○	○	KaVoLUX 540 LED	○	○	○	○
Pneumatisk brems for armsystem	-	○	-	○	Monteringsstolpe for belysning	○	○	○	○
Brettholder for to standardbrett	●	●	-	●	Adapter for montering av stolpe for belysning (f.eks. intraoral skanner)	○	○	○	○
Servicebord 1568 for to standardbrett	-	-	○	-					
					Pasientkommunikasjon				
Sykepleieenhet					KaVo CONNECT base	○	○	○	○
Kapasitiv berørings skjerm	●	●	●	●	CONEXIO	○	○	○	○
Fem instrumentholdere	●	●	●	●	KaVo Screen One	○	○	○	○
Sug for sprøytetåke	●	●	●	●	KaVo Skjerm HD	○	○	○	○
Spyttsuging	●	●	●	●	KaVo ERGOcam One	○	○	○	○
2. Spyttuging	○	○	○	○	KaVo DIAGNOcam	○	○	○	○
Tre-funksjons sprøyte	○	○	○	○	KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	○	○	○	○
Flerbrukssprøyte	○	○	○	○					
Polymerisering håndholdt enhet Satelec Mini LED	○	○	○	○					

● Utstyr i serien | ○ Ekstra utstyr | x Må velges | - Ikke tilgjengelig
¹Kun i forbindelse med DVGW-vannblokken og DVGW-vannflasken | ²Til redusert pris

Metallisk skimrende lakkfarger

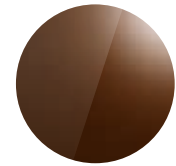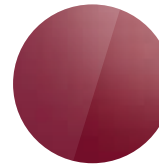

MidnattsblåRøyk blåSølv blåSølvBærCrimsonSjokolade brun

Lakk farger




OransjeEplegrønnHavblåttHvit

Note! Trykkfargene gjengir seg ikke den sanne fargen. (Be om et KaVo fargekart!)








Polstringsfarger som er eksklusive for KaVo uniQa





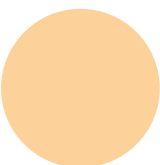


Chili rødAprikosSilkegrå

Møbeltrekk farger

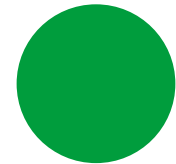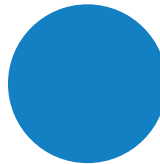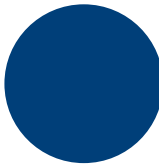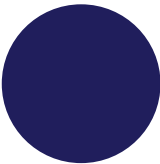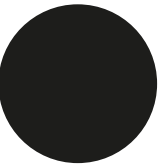

SvartMidnattsblåRøyk blåHavblåttMynteGrøntSmaragdgrønn

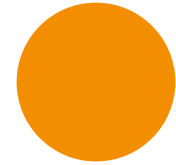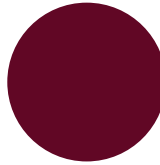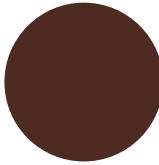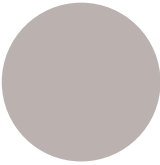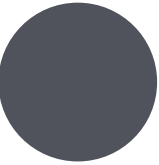

AntrasittgråPerlegråSjokolade brunCrimsonBærRubinrødOransje

Dental Excellence innen alle områder



Utstyr til din klinikk

Behandlingsenheter, behandlingslys, tannlegestoler, pasientkommunikasjonssystemer og tilleggstilbehør til tannklinikker fra KaVo.



Instrument

Håndstykker og vinkler, turbiner, poleringsvinkler og små enheter for alle bruksområder – fra diagnostikk via profylaktiske behandlinger til restaurering, kirurgi, endodonti og instrumentpleie og vedlikehold.

Produktene, utstyret og tjenestene vist og beskrevet i denne katalogen er ikke tilgjengelig i alle land. All informasjon var korrekt ved trykking. KaVo Dental GmbH påtar seg intet ansvar for farge- eller formavvik i forhold til bildene eller eventuelle trykkfeil og forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i innholdet i brosjyren. Gjentrykk, selv deler av denne brosjyren, er kun tillatt med tillatelse fra KaVo Dental GmbH.

Oversatt til norsk 23.08.2024 av Dental Sør AS

KaVo og uniQa er registrerte varemerker for KaVo Dental GmbH.