



CATTANI

air technology

Utstyr til MASKINROMMET



**Ikke undervurder ditt maskinrom.
Stopper sug eller kompressor,
stopper klinikken.**

dental sør
OPPLEV 1. KLASSE

Dental Sør AS - tlf. 38 27 88 88 - post@dentalnet.no - www.dentalnet.no

Vi har levert store og små maskinrom fra Cattani siden 1989, og kan garantere deg kvalitet, stabilitet og fornuftige løsninger til din klinikk.

Tips: Det kan være fornuftig å velge 2 mindre i stedet for en stor motor med tanke på driftssikkerheten.

Pakke 1 for 1 unit - Uni Jet sugemotor

inkl. lyddemper og vibrasjonsfotter.

Tekn. data:
220vac/0,75 Kw, 2000 l/min, 1400 mm H2O. Slangetilkobling 50mm



Pakke 2 for 1-3 uniter - Tecno Jet sugemotor

inkl. lyddemper og vibrasjonsfotter.

Tekn. data:
220vac/0,4 Kw, 1250 l/min, 1300 mm H2O. Slangetilkobling 32mm



Pakke 3 for 3-4 uniter - Flux Jet sugemotor

inkl. lyddemper og vibrasjonsfotter.


Tekn. data:
220/380vac, 1 eller 3-fase, 1,1-1,3Kw, 3300 l/min, 1500 mm H2O.



Pakke 4 for 6 uniter - Medio Jet sugemotor

inkl. lyddemper og vibrasjonsfotter.

Tekn. data:
380vac, 3-fase, 2,2Kw, 5000 l/min, 1750 mm H2O.

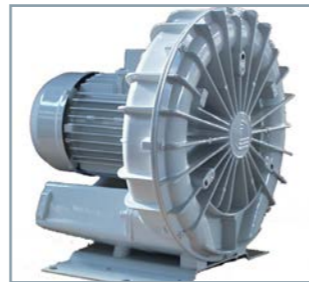

TurboSmart - Alt i en maskin på liten plass

Pakke 5 for 1-2 uniter - TurboSmart

TurboSmart uten deksel
Tillegg for støydempende deksler (sjeldent nødvendig)
Oppgradering/chipping fra 1-2 til 3-4 uniter



Tegnforklaring: De minste sugemotorene leveres kun i 1 fase/220 vac. De større leveres enten i både 1 og 3 fase i forskjellige spenninger (vac). Kw angir strømforbruket, l/min er antall liter luft motoren suger i minuttet (flow). H2O er antall mm motoren

vil løfte. væsker over sin egen høyde (vakuum). Vi leverer selvfølgelig større anlegg, diverse festeanordninger/stativer og vi fører norskproduserte styrebokser med innebygd motorvern.

Ren og tørr luft

-er en betingelse i en moderne praksis. kompressor. Setter du sammen 2 ulike kompressorer, blir anlegget aldri bedre enn det dårligste elementet i kjeden. Har du mer enn 3-4 uniter bør du vurdere en tandemkompressor. To separate aggregat på samme tank som gir dobbelt så lang levetid, mindre varme -dvs. mindre kondens som skal tørkes - og det gir en 100% dekning om det ene skulle trenge service eller stoppe.

CATTANI oljefrie kompressor komplett med lufttørke og filtersett, er i stand til å levere ren og tørr luft av ekstrem høy kvalitet. Med sterilfilter (tilleggsutstyr) renses luften effektivt og fjerner 99.9999+% av partikler med diameter på 0.01µm. Vi har valgt kvalitet og driftssikkerhet som vårt motto, derfor tilbyr vi 3 års garanti.



1 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for 1 behandlingseenhet. Leveres med eller uten støyhette, som 1-fase motor. Lagerført modell markert med *

Type	Leveret luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC100	67,5 liter	30 liter	47	70 dB	(1~) 230-240-50 Hz - 3,8 A - 0,55 kw	013130
AC100Q med hette	67,5 liter	30 liter	57	63 dB	(1~) 230-240-50 Hz - 3,8 A - 0,55 kw	013150

2 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for opptil 2 behandlingseenheter i samtidig bruk. Leveres med eller uten støyhette, som 1- eller 3-fase motor. Lagerført modell markert med *

Type	Leveret luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC200*	160 liter	30 liter	54	70 dB	(1~) 230v-50 Hz- 7,7 A - 1,2 kw	013230
AC200	160 liter	30 liter	54	70 dB	(3~) 400v-50 Hz- 3,6 A - 1,5 kw	013235
AC200Q med hette	160 liter	30 liter	63,5	63 dB	(1~) 230v-50 Hz- 7,7 A - 1,2 kw	013250
AC200Q med hette	160 liter	30 liter	63,5	63 dB	(3~) 400v-50 Hz- 3,6 A - 1,5 kw	013252

3 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for opptil 3 behandlingseenheter i samtidig bruk. Leveres med eller uten støyhette, som 1- eller 3-fas motor Lagerført modell markert med *

Type	Leveret luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC300*	238 liter	45 liter	64	73,6 dB	(1~) 230v-50 Hz- 10,2 A - 1,5 kw	013330
AC300*	238 liter	45 liter	64	73,6 dB	(3~) 400v-50 Hz- 3,7 A - 1,5 kw	013335
AC300Q med hette	238 liter	45 liter	80	63 dB	(1~) 230v-50 Hz- 10,2 A - 1,5 kw	013350
AC300Q med hette	238 liter	45 liter	80	63 dB	(3~) 400v-50 Hz- 3,7 A - 1,5 kw	013353

2x2 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for opptil 4 behandlingseenheter i samtidig bruk. Leveres med eller uten støyhette, som 1- eller 3-fase motor. Lagerført modell markert med *

Type	Leveret luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC400	320 liter	100 liter	112	73 dB	(1~) 230v-50 Hz- 15,4 A - 2,4 kw	013430
AC400	320 liter	100 liter	135	63,8 dB	(3~) 400v-50 Hz- 7,2 A - 3 kw	013435
AC400Q med hette	320 liter	100 liter	135	63,8 dB	(3~) 400v-50 Hz- 7,2 A - 3 kw	013435

2x3 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for opptil 6 behandlingseenheter i samtidig bruk. Leveres med eller uten støyhette, som 1- eller 3-fase motor. Lagerført modell markert med *

Type	Leveret luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC600*	476 liter	150 liter	137	74 dB	(3~) 400v-50 Hz- 7,4 A - 3 kw	013535
AC600Q m. hette	476 liter	150 liter	169	70,4 dB	(1~) 400v-50 Hz- 7,4 A - 3 kw	013550

Ren og tørr luft

3x3 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for opptil 13-15 behandlingsenheter i samtidig bruk. Leveres med 3-fase motor. Lagerført modell markert med *



Type	Leverst luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC900	714 liter	300 liter	260	75 dB	(3~) 400v-50 hz- 11,1 A - 4,5 kw	013599

6x2 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for opptil 15-17 behandlingsenheter i samtidig bruk. Leveres med 3-fase motor. Lagerført modell markert med *



Type	Leverst luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC1200	952 liter	300 liter	303	81 dB	(3~) 400v-50 hz- 19,4 A - 9 kw	013595

6x3 SYLINDRET KOMPRESSOR M/TØRKE

Passer for opptil 20-25 behandlingsenheter i samtidig bruk. Leveres med 3-fase motor. Lagerført modell markert med *



Type	Leverst luft	Tank	Vekt	Støynivå	Elektriske data	Varenr.
AC1800	1428 liter	300 liter	394	82,5 dB	(3~) 400v-50 hz- 29,1 A - 13,5 kw	013594

STØRRE ANLEGG!



ELLER LITEN Plass?

Block-Jet er et solert og ventilert skap montert på hjul og utstyrt med: **TurboSmart B** (for 2 eller 4 uniter) med inkludert amalgamutskiller. **3 sylindret kompressor** med tørke.

Støynivå 51.5 dB (A).
230V-50Hz
Dim. B=760mm, D=650, H=1935.
Netto vekt 270 kg.

Sammen med Cattani tilbyr vi uforpliktende forslag til maskiner og røredimensjoner, uansett klinikkens størrelse.

Vakuumsug og amalgam-utskilling. Tørr, ren og om ønskelig medisins luft, alt dimensjonert til dine behov.