

Nyhet

DTEC
LIGHTING SYSTEMS



Clair

Clinical LED lighting



En stor LED-nyhet har anlänt


Som en praktfull fågel breder den ut sina lysande vingar. En behaglig känsla omger dig. Clair är här.

Målsättningen när vi designade Clair var att förse kliniska miljöer med en stor LED-armatur som levererar maximalt med ljusstyrka och färgåtergivning. Resultatet blev så mycket mer. Clair är en hygienisk och energisnål armatur som avger minimalt med strålningsvärme samtidigt som den förser dig med ett optimalt arbetljus. Dessutom smälter dess visuella yttre in i din arbetsmiljö, storleken till trots.

Med tillvalet dynamiskt dagsljus kan du anpassa ljusstyrkan för att simulera riktigt dagljus. Att kunna ändra färgtemperaturen efter dagsljusets skiftningar ger inte bara ett bra arbetljus, det skapar en behagligare känsla och arbetsmiljö.

En stor LED-nyhet är här. Clair har anlänt.



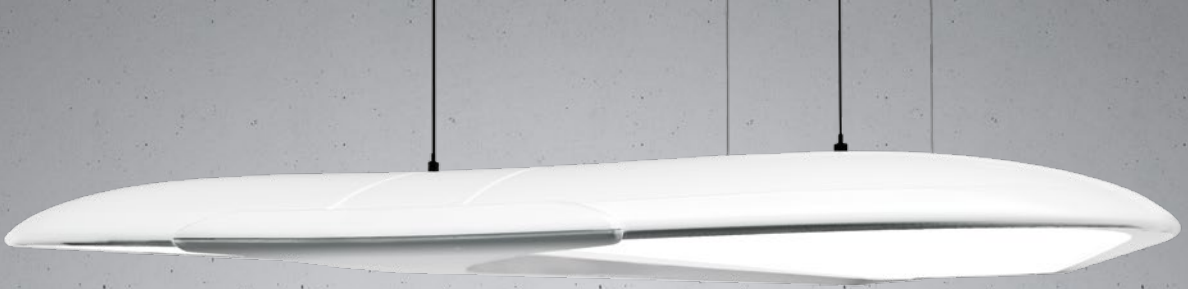

| Produkt: | Ljuskälla: | Volt: | Ljusstyrka: | Färgtemperatur: | Mått: | Vikt: |
|----------|---------------|-------|------------------|---------------------------|----------------|---------|
| CL104 | LED 104-216 W | 230 V | 12 800-21 325 lm | 3 000 K RA93-6 000 K RA85 | 1 530 x 670 mm | 16,3 kg |

Hygien på en högre nivå

För nästan alla våra kunder är hygien en nyckelfaktor. I en utsatt miljö så behöver allt hjälpa till för att undvika smittspridning och kontaminering. Clair är byggd för detta. Den är konstruerad med en överkåpa helt i aluminium och armaturen är kapslad så att ingen smuts kan tränga in, vilket gör den hygienisk och lätt att rengöra.

Dynamiskt dagsljus och indirekt ljus (tillval)

Som tillval kan du välja ett dynamiskt ljus, vilket betyder att du har möjlighet att själv ställa in det optimala arbetsljuset efter dina preferenser och dagsljusets skiftningar. Hela rummet ändrar karaktär när man ändrar färgtemperaturen och för dig som arbetar under armaturen betyder det att du får en behagligare känsla som följer vår biologiska rytm och som också kan anpassas efter behov. Det här är en funktion som måste upplevas.

Du kan även välja att ha ett indirekt uppåtriktat ljus som gör att kontrasten mellan den starka arbetsbelysningen och den omgivande belysningen mildras. Det medför att ögonen inte behöver anpassa sig lika mycket när de rör sig mellan de olika ljuszonerna.

Styr allt med ett knapptryck

Den medföljande fjärrkontrollen har dimmerfunktion och två snabbknappar som kan ställas in för exempelvis röntgenbetraktning och arbete med kompositer. Har du dessutom valt dynamiskt ljus så styr du även färgtemperaturen via den.

En rik belysning för kliniska miljöer

Lägg ena handen tio centimeter över den andra när du står under skenet på Clair. Det du upptäcker är att den övre handen inte skuggar den nedre. Detsamma gäller faktiskt alla D-TECs armaturer. Ljuset från Clair projiceras från armaturens ramverk in mot de ljusfördelande prismorna, istället för nedåt, på så vis kommer du aldrig se några ljuskällor utan upplevelsen blir ett jämnt och skuggfritt ljus. Helt genialiskt om du frågar oss.