

KAVO

UNIQA

Den nya kompakta
premiumklassen



YOUNIQUE – anpassas efter dig

Dagens tandläkarkliniker är mycket mer än en plats för tandvård.

De är uttryck för tandläkarnas individualitet – designen, utrustningen och de konsultationer och behandlingar som kliniken utför ger kliniken dess unika signum. Behandlingsrummen är även ett uttryck för tandläkarens idéer om balans mellan arbete och fritid, effektivitet och nöje.


Dagens patienter förväntar sig mer än tidigare – de vill känna sig förstådda, bekväma och säkra.

KaVo uniQa är klinikens centrum och uppfyller de här kraven med precision – utifrån både tekniska och känslomässiga aspekter. De smarta funktionerna och KaVos välkända precision och höga kvalitet gör det möjligt att utföra framgångsrika behandlingar på lång sikt. Samtidigt lämnar KaVo uniQa tillräckligt med utrymme för tandläkarens egna, unika uttryck.

KaVo uniQa – där "Dental Excellence" möter individen.

KaVo I DEN VACKRASTE AV FORMER

Design, precision, teknik och användbarhet in i minsta detalj – den nya KaVo-standarden är unik.

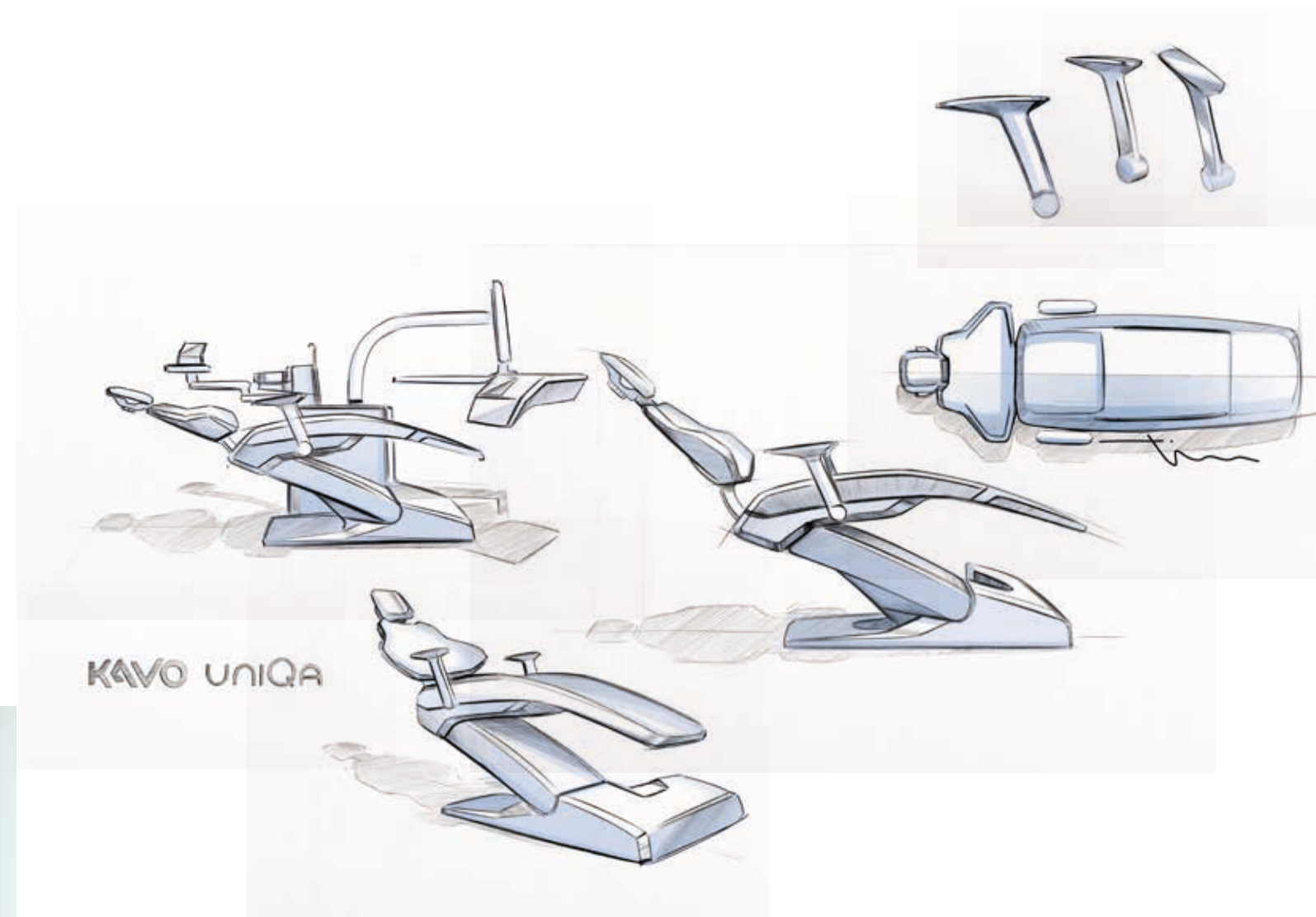

Intelligenta, unika produkter kan endast skapas med tydliga mål, en stark vilja, ett konsekvent fokus och en stor dos laganda. Produkter som uppfyller kraven som moderna tandläkarkliniker ställer. Produkter som inspirerar glädje. Produkter som nya KaVo uniQa.

Armin Imhof, Chief Technical Officer på KaVo, och Jürgen Hinderhofer, designer och VD för SLOGDESIGN, diskuterar vad som gör nya KaVo uniQa unik – och ger en spännande inblick bakom kulisserna av utvecklings- och designarbetet.



KaVo
uniQa

Vad tycker du gör nya KaVo uniQa till en "sann" KaVo-behandlingsenhet?

Armin Imhof (AI): Först och främst representerar KaVo precision, användarvänlighet, prisvärdhet, tillförlitlighet och naturligtvis en viss grad av digitalisering. En KaVo-produkt är en arbetsutrustning på högsta nivå – något vi har betonat med vår nya KaVo uniQa-behandlingsenhet.

Namnet uniQa för tankarna till något som är unikt och omiskännligt speciellt. Vilka aspekter vill du betona i det här sammanhanget?

AI: Med uniQa sammanför vi premiumnivån med mellanprissegmentet. Tidigare var funktionerna i vår nya behandlingsenhet endast tillgängliga i det högre prissegmentet. Under utvecklingen fokuserade vi på fyra områden: patientstolen, hygienfunktionerna, touchkontrollerna och självklart designen. Det är till stor del de här fyra aspekterna som ger uniQa dess omiskännliga karaktär. Och självklart var även det typiska KaVo-arbetsflödet en del av vårt fokus, då vi strävar efter att undvika att tandläkare ska behöva göra onödiga förändringar av välbekanta och välfungerande processer.

Jürgen Hinderhofer (JH): På designnivån ville vi i första hand erbjuda fler funktioner i en mer kompakt miljö. Till exempel är många komponenter avfasade, vilket minskar volymen och ger mer exakta kanter. Det ger produkten en unik look och den välkända KaVo-precisionen.

AI: I stort sett kan vi säga att vi trots de många tekniska funktionerna har utvecklat ett intuitivt, intelligent och lättanvänt koncept och kombinerat det med högkvalitativ design och ett tydligt, kompakt formspråk. Och under processen kombinerades premiumfunktioner och beprövade system med nya funktioner och idéer på ett smart sätt. Slutprodukten är helt enkelt unik – både ur ett tekniskt och designmässigt perspektiv.

Tid är en värdefull vara – och det gäller även för tandläkarkliniker. Ett effektivt arbetsflöde och god användbarhet är viktiga kriterier för en behandlingsenhet. Hur arbetar ni med de aspekterna på KaVo?

AI: På KaVo ser vi det som vårt ansvar att hitta smarta lösningar som uppfyller kundernas behov av effektivitet. Vi följer noga hur klinikernas team arbetar och försöker göra livet enklare för alla som använder våra enheter. Ett exempel är magnetförlutningarna som används vid införande av vätskor för hygienrutiner: uniQa har ett magnetsystem som centrerar och stänger luckor. Det här är funktioner som inte bara gör processen enklare och snabbare, utan även är roliga att använda. Och i slutändan är det just den här typen av små detaljer som betyder mest.

JH: Låt oss inte förbise hygienaspekterna – att undvika fogar eller kanter som är svåra att rengöra håller designteamet sysselsatt under hela processen. I slutändan är det alltid summan av alla väldesignade detaljer som resulterar i en lyckad, harmonisk helhetsbild. Det är också en del av kvaliteten.



ARMIN IMHOF

” Slutprodukten är helt enkelt unik – både ur ett tekniskt och designmässigt perspektiv. ”

Du nämner kvalitet. Vad är bra kvalitet ur din synvinkel och hur återspeglas det i KaVo uniQa?

JH: Förutom användarvänlighet, hygien och de tekniska egenskaperna som vi redan har nämnt spelar det naturligtvis även roll hur produkterna känns. Hur känns till exempel ytorna eller instrumenten när jag lyfter dem ur hållaren? Hur känns klädseln? uniQa-klädseln är inte kall och obekväm, utan varm och sammetslen när du rör vid den. När det kommer till hur produkterna uppfattas, känns den höga kvaliteten i ordets rätta bemärkelse. Gällande valet av material kombineras funktionalitet och livslängd med värde och design. Höljet behöver även vara tillverkat av ett material som är reptåligt, kemikaliebeständigt och UV-beständigt för att undvika att det gulnar.



Det blir allt viktigare att kunna anpassa enheter. I vilken utsträckning påverkar kravet på anpassningsbarhet designen?

JH: Designen kan enkelt anpassas efter olika individer, bland annat när det gäller färg. Färg är ett viktigt designelement och påverkar stämningen i ett rum. Varma toner har en annan effekt än kalla toner eller pastellfärger. Vi blir alltmer medvetna om att konsekventa färgkoncept implementeras på tandläkarkliniker eller att olika rum har olika färgteman som skiljer dem åt. Det finns många olika sätt att implementera egna idéer och önskemål på. Men en KaVo uniQa passar alltid in och kan anpassas visuellt med val av klädsel eller färg.

AI: Det är precis det som är poängen. Allt fler tandläkare utvecklar ett genomtänkt koncept för sin verksamhet och behandlingsenheterna måste integreras i dessa koncept. Det kan vara färgkoncept, men även specifika teman som "lugn" eller "natur". uniQa symboliserar det unika och individualiteten hos varje enskild tandläkare – kroppsbyggnad och arbetssätt skiljer sig från person till person. Därför är det möjligt att konfigurera uniQa på många olika sätt. Som premiumtillverkare måste vi erbjuda lämpliga produkter som uppfyller kraven som dagens tandvård ställer.

JÜRGEN HINDERHOFER

” Faktum är att hållbara produkter med lång livslängd kräver exceptionellt högkvalitativa material. Det är nyckeln till att skapa KaVo-kvalitet in i minsta detalj. ”

Kvaliteten på materialen under höljet är också viktig – här har vi till exempel använt högkvalitativa gjutna aluminiumdelar.

AI: Det stämmer. En lång livslängd och precision är resultatet av en högkvalitativ produkt. Den långa livslängden säkerställer ett enastående förhållande mellan pris och prestanda och så få driftstopp som möjligt. Precision gör det dagliga arbetet enklare, eftersom det är viktigt med pålitliga funktioner när arbetsmoment upprepas hundratals gånger per dag. Arbetsflödet och dess ergonomi måste även vara enkelt och tillförlitligt. En behandlingsenhet kan användas på en tandläkarklinik i upp till 20 år – och vi vill att den ska vara enkel att använda varje dag samtidigt som den uppfyller teamets höga förväntningar.

ARMIN IMHOF

” Som premiumtillverkare måste vi erbjuda lämpliga produkter som uppfyller kraven som dagens tandvård ställer. ”



JÜRGEN HINDERHOFER

” Bra design är kompromisslös, diskret, ärlig och genomtänkt in i minsta detalj. Patienterna kommer alltid att lägga märke till detaljerna. ”



Fokuset flyttas även alltmer till patienten. Hur påverkar utformningen av en behandlingsenhet patienten?

JH: Bra design är kompromisslös, diskret, ärlig och genomtänkt in i minsta detalj. Patienten kommer alltid att lägga märke till detaljerna. KaVo uniQa är bekväm och betryggande. Den konsekventa, tydliga designen har högst troligt någon form av effekt på dem som kommer i kontakt med den.

AI: Det är precis vad det handlar om. Det handlar om att ta en mycket komplex produkt med tusentals funktioner och ge den ett enkelt, avskalat utseende. Så att den mer ser ut som en möbel. Patientstolen ser väldigt elegant

och minimalistisk ut – den har till exempel inga påskruvade delar men har ändå otaliga funktioner. Och det var målet – att inte avskräcka med en överdrivet praktisk design, utan att skapa välbefinnande med den visuella framtoningen.

Slutligen, om du måste beskriva KaVo uniQa i högst tre meningar, hur skulle det låta?

AI: Enastående ergonomi i sin vackraste form sammanfattar enheten för mig: KaVo uniQa är ett premiumverktyg med en enastående design. För mig är dessa två egenskaper, ergonomi och design, också de huvudsakliga utmärkande egenskaperna för en behandlingsenhet från KaVo.



KaVo uniQa – fördelarna:

Patientstolen – ergonomiskt fulländad

1. En modern, inspirerande och kompakt stoldesign med fokus på ergonomi.
2. En högsta position på 830 mm och en lägsta position på 350 mm.
3. Integrerad Trendelenburg-rörelse för patienterna.
4. Armstöd på båda sidorna för enkel i- och urstigning.
5. En högsta patientvikt på 185 kg.

Tandläkarenheten – rörande enkel

6. Intuitiv användning med snabb och direkt tillgång till alla viktiga funktioner för tidsbesparande och sömlösa behandlingsprocesser.
7. Fyra bryggversioner: från de kompakta TM-bryggorna, S-bryggorna och vagnvarianterna, som även är lämpliga för vänsterhänta användare, till den ännu mer eleganta och ergonomiska T-bryggan för högerhänta.

Patientkommunikation – tydlig display

8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: en intraoral 3-i-1-kamera för utmärkt kariesdiagnostik i full HD.
9. Skärmar med hög upplösning: KaVo Screen HD på 22 tum och KaVo Screen One på 19 tum.
10. CONEXIO: Datagränssnitt för åtkomst till patientdata direkt på behandlarenheten.
11. Enkel och nätverksberoende patientkommunikation med den självförsörjande versionen av KaVo CONNECTbase.

Hygien – effektivt automatiserad

12. Bekväma hygienrutiner: integrerade sköljprogram, DEKAmat och OXYmat samt hygienheten med en integrerad avtagbar adapter för instrument och sugslangar för tidsbesparande, automatisk rengöring och desinfektion.

Fullständigt integrerade endodontiska och kirurgiska funktioner

13. Endodontiska funktioner med tre olika lägen för filkontroll och en expanderbar fildatabas med nästan 200 förinställda filer.
14. Kirurgisk funktion: en liten och lätt kirurgisk motor och en integrerad saltlösningsskåp.

Tillbehör – smarta kombinationer

15. Optimal behandlingskomfort med KaVoLUX 540 LED tack vare ett naturligt ljus och ett enhetligt ljusfält.



INTUITIVA FUNKTIONER



Hitta funktioner enkelt och snabbt med det intuitiva användargränssnittet på tandläkarenhetens högkvalitativa glaspekskärm. Du kan se fram emot ett smidigt, snabbt och enkelt arbetsflöde.

Mer frihet – för mer individualitet

Universallösningar är ett minne blott – din behandlingsenhet borde vara lika unik som du är. Skräddarsy din KaVo uniQa-utrustning efter dina egna krav och in i minsta detalj. Tack vare den flexibla instrumenteringen kan det göras på ett ögonblick: utrusta tandläkar- och sköterskeenheten för att passa dig och ditt teams specifika önskemål. Många funktioner kan anpassas efter användaren, som namn, behandlingstyper och direktknapparna på hemskärmen. Och om ditt behandlingsfokus skulle ändras så är det inga problem.

Justeringar kan göras när som helst. Möjliga ändringar kan till exempel var en uppgradering från fem till sex ställ eller eftermontering av endodontiska och kirurgiska funktioner.

Bekvämare – mer användarvänlig

Arbeta smidigare – med hjälp av pekskärmen eller fotkontrollen kan du enkelt komma åt vilken funktion eller parameter som helst på de integrerade specialenheterna under behandlingar. Du kan hela tiden se all information på tandläkarenheten. Du kan även när som helst programmera anpassade behandlingsprocesser. Hitta en position för tandläkarenheten

som är bekväm för dig. Sittande eller stående. Ensam eller med hjälp. Med brygga, vagn eller svängarm. På så sätt har du alltid allt inom räckhåll.

Fler uppkopplingsmöj- ligheter – för mer flexibilitet

Med hjälp av USB-gränssnitten kan du enkelt ansluta ytterligare enheter när du vill. På några sekunder känner be- handlingssystemet uniQa automatiskt igen vad det är som du har anslutit. Så du kan luta dig tillbaka och omfamna framtiden.



uniQa-användargränssnittet i tre ord: tydligt, hygieniskt, effektivt

Allt är på rätt plats

Oavsett om du använder fem eller sex instrumentställ så kan varje position enkelt konfigureras efter dina önskemål. Eller så kan du helt enkelt uppgradera från fem till sex ställ vid ett senare tillfälle. Det är enkelt med nya KaVo uniQa.

Allt sparas på en och samma plats

Smart lagring av data: du kan snabbt och tillförlitligt hämta sparade parametrar för upp till fem behandlingstyper för varje instrument. För upp till sex utövare – KaVo uniQa gör det möjligt.



Allt är inom räckhåll

Ibland behövs en uppgradering – med T-versionen får komfort och bekvämlighet en helt ny betydelse då hanteringen och tillgängligheten av tandläkarenheten blir ännu enklare med T-bryggan för högerhänta användare. Den stora brickan har mer förvaringsutrymme och handtaget på tandläkarenheten är avtagbart och finns även i en steriliserbar version. KaVo uniQa ger dig en helt ny nivå av bekvämlighet.

Allt är inom synhåll

Snabb och enkel användning tack vare den intuitiva pekskärmen: när du lyfter ett instrument får du snabbt en överblick över all viktig information. Så att du kan behålla fokuset.

Smarta specialfunktioner – inte bara för specialister



Det är insidan som räknas – den endodontiska funktionen

De integrerade endo-funktionerna innebär att du inte behöver köpa till en dyr endodontisk enhet. Med tre olika lägen för filstyrning och den integrerade fildatabasen med nästan 200 förinställda filer kan du konfigurera, ta fram och spara alla viktiga parametrar, som omvandling av mätvärden och vridmoment, direkt på tandläkarenheten. Du kan när som helst lägga till nya filer. Det här är ett endodontiskt paket som är genomtänkt från A till Ö.



En ljus idé – det smarta kirurgiska alternativet

Om du dessutom väljer att utrusta KaVo uniQa med KaVo INTRA LUX S600 LED får du obegränsad tillgång till alla funktioner som en modern kirurgisk apparat har i kombination med de kirurgiska KaVo-instrumenten och saltlösningspumpen som är integrerade på tandläkarenheten. Något som underlättar ditt arbete.



Det här är så kraftfullt ljus kan vara – den kirurgiska motorn S600 LED

Den kirurgiska motorn KaVo S600 LED har allt. Den är 28 % lättare och 20 % kortare än sin föregångare – det är en av de lättaste och minsta kirurgiska motorerna på dentalmarknaden. Mycket kraft i en liten förpackning.

Holistisk design – med en integrerad saltlösningspump

Effektiv avlastning och komfort under kirurgiska behandlingar – saltlösningspumpen är integrerad i tandläkarenheten och hållaren för saltlösningen gör det möjligt. Det är 360° av kirurgisk funktionalitet.



TÄNK PÅ HÅLLNINGEN



Förhindra hälsoproblem och smärta med KaVo uniQa. Utöva din konst med så lite stress som möjligt och med en god hållning. Upplev friheten med naturliga, intuitiva processer och gör det möjligt för dina patienter att alltid vara bekväma och avslappnade. Det finns inget viktigare än hälsan.



*En lägsta position på 350 mm
och en högsta position på 830 mm*



Arbeta på rätt höjd

KaVo uniQa är lika flexibel som du är unik. Du kan inte bara anpassa uniQa efter personliga önskemål och vanor, utan även efter din längd. Höjden på patientstolen kan justeras mellan 350 mm och 830 mm, vilket säkerställer optimala ergonomiska förhållanden oavsett om du utför behandlingar sittande eller stående. Allt för att du ska kunna göra ditt bästa arbete.

Njut av din nyvunna frihet

Nu kan du röra dig friare med mer benutrymme. Allt utrymme du behöver finns under KaVo uniQas patientstol. Du kan även placera fotkontrollen där det passar dig – patientstolens kompakta design och stegplatta gör det möjligt. För ergonomiska positioner och enkel åtkomst till dina patienter. För den där fantastiska känslan av frihet.



Den bästa positionen någonsin

KaVo uniQas patientpositionering enligt Trendelenburg är både bekväm och ergonomisk i varje behandlingsposition: fotstödet vinklas och höjs automatiskt för att matcha ryggstödet lutning. Den kombinerade rörelsen förhindrar kompression eller utsträckning av patientens rygg när ryggstödet justeras. Den förhöjda benpositionen underlättar cirkulationen. Patienten är alltså bokstavligen alltid i den bästa positionen.



Ta dig upp och ner – men ta det lugnt

Armstöden på KaVo uniQa kan enkelt svängas nedåt, vilket gör det enklare att ta sig upp i och ner från stolen. Samtidigt ger de stöd och skydd under behandlingen utan att du som tandläkare behöver begränsa din rörelsefrihet. Det innebär optimal komfort för dig och din patient från och med nu.

Perfekt positionerad

Beroende på indikation eller patientstorlek är det möjligt att hitta den perfekta positionen med den flexibla vändbara klädseln och det tvåledade nackstödet, så att dina patienter kan ligga i en optimal position och du kan arbeta i en avslappnad och ergonomisk ställning som främjar koncentrationen. Bra för dig. Bra för dina patienter.

Allt sitter i huvudet

Du kan använda den steglöst justerbara lutningsvinkeln på nackstödet för att justera nackstödet och därmed läget på patientens huvud och mun. Dina patienter ligger helt avslappnade på den bekväma huvudkudden och du har ständig och optimal tillgång till arbetsområdet. För komfort börjar med huvudet.



Optimerat ryggstöd: för en optimal arbetsställning och åtkomst till patientens mun.



Allt är inom räckhåll: ett tvåledat nackstöd med tryckknapp och en vridbar huvudkudde som är enkla att justera.

Vänster eller höger? Det spelar ingen roll!




KaVo uniQa står för individualitet och flexibilitet, så den är självklart tillgänglig i två varianter – en för vänsterhänta och en för högerhänta. Oavsett vad du bestämmer dig för i dag kan du alltid ändra dig senare. Det är investeringssäkerhet à la KaVo.

Ergonomisk från topp till tå

Varje rörelse är perfekt

Upplev hur bra det känns att kunna arbeta i en ännu mer avslappnad atmosfär med perfekta avstånd till instrumenten. Oavsett om du arbetar ensam eller med en sköterska kan alla versioner av tandläkarenheten

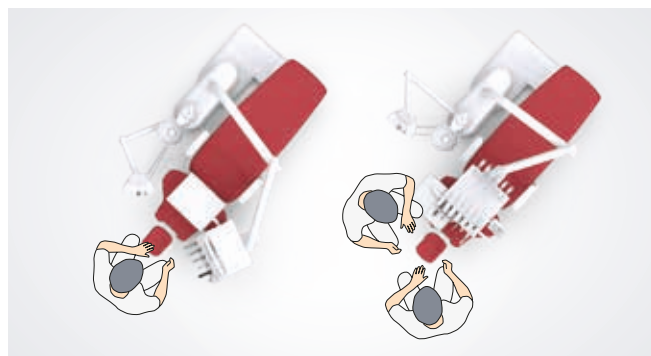

samt brickhållaren och sköterskeenheten placeras efter dina önskemål tack vare det stora rörelseomfånget. Den maximala förlängningslängden på instrumentslangarna på 90 cm och den låga brygghöjden på 45 cm ger många behandlingsmöjligheter med svängarmsversionen.



Din sköterska har allt inom räckhåll

KaVo uniQas sköterskeenhet är utrustad med en kapacitiv pekskärm och ett tydligt användargränssnitt. Alla centrala funktioner för stolen, hygienproceserna och operationsbelysningen är enkla att nå. Instrument kan positioneras enkelt och exakt enligt användarens vanor och önskemål. Den avtagbara instrumentbrickan säkerställer optimal hygien. Dessutom gör den flexibla höjjusteringen och det stora vridområdet sköterskeenheten till en ergonomiskt fullträff.



Den perfekta fotkontrollen

Har du händerna fulla under behandlingen? Det är inget problem med KaVo uniQa. Nu kan du enkelt styra alla funktioner och integrerade enheter med foten. Det gäller även CONEXIO-systemprogramvaran. Det gör också risken för korskontaminering mindre. Det finns även en trådlös version för ännu flexiblere placering. För att du ska ha fullständig kontroll.



Ett effektivt arbetsflöde betyder en sak: att hitta den kortaste möjliga vägen

Den centrala utgångspunkten

Grundpelaren för ditt optimala arbetsflöde? Stödsystemet KaVo Centro. Alla viktiga enheter är praktiskt och ergonomiskt samlade på ett ställe – så att det smarta systemet blir utgångspunkten för dina behandlingsprocesser, gripbanor och rörelsesekvenser. Kortdistansprincipen innebär att du alltid har allt du behöver inom räckhåll. När du byter och uppgraderar till andra enheter och framtida tekniker kommer du att kunna arbeta med optimal flexibilitet. Tack vare olika adapterar kan enheter och komponenter bytas ut snabbt och enkelt. För dig betyder det att du får ett optimalt arbetsflöde med KaVo uniQa – för vad kan vara bättre än känslan av att ha allt under kontroll?



Kan utrustas för anpassat arbete – stödsystemet KaVo Centro



Intraoral röntgenbilder är alltid inom räckhåll

Installera enkelt en passande intraoral röntgen på belysingsstolpen med en adapter och du kan ta optimalt anpassade röntgenbilder direkt vid behandlingsenheten – med hög precision, tidsbesparande och precis vid patienten. Det blir inte enklare.


OPTIMAL PATIENT-KOMMUNIKATION NÄRA TILL HANDS



Visa patienterna varför vissa behandlingar behövs med högupplösta bildfynd och fantastisk färgåtergivning.

KaVo ERGOcam One – liten kamera, riktigt stor effekt

Hjälp dina patienter att förstå sin tandhälsa med bilder som har stort skärpedjup och utmärkt färgåtergivning. Med lättanvända KaVo ERGOcam One kan du ta perfekta bilder när som helst. Kameran gör det möjligt att visa en skarp bild på ett avstånd på 10–25 mm. Avtryckaren kan utlösas för hand eller med fotkontrollen.

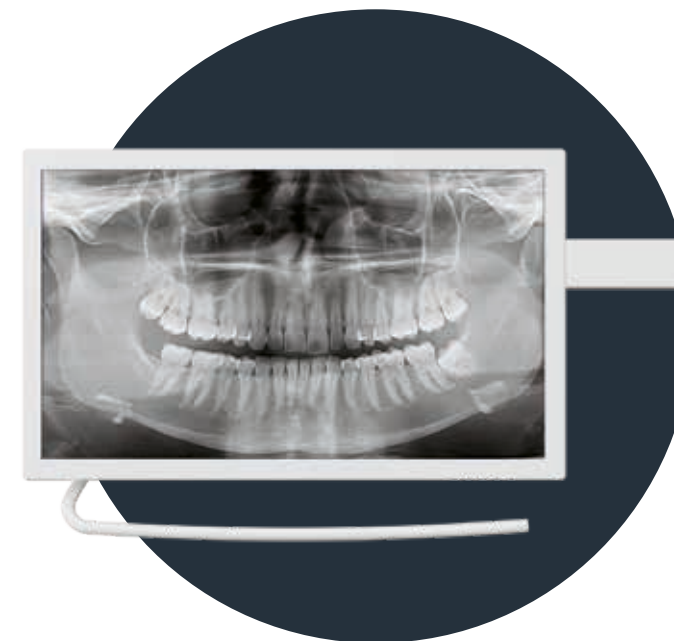

Visa patienterna vad du ser

Imponera med skarpa bilder. KaVo-skärmarna har funktioner som högupplöst bildkvalitet, höga kontrastvärden och fantastisk färgåtergivning. De är optimalt anpassade till bildenheternas funktioner, såsom kameror och mikroskop. Skärmen har en skyddande glastruta, små mellanrum på höljet och kan justeras med en enkel handgest för en hög hygiennivå. Ett enkelt val när du vill fokusera!

KaVo Screen HD – det perfekta valet i full HD

- Plattskärm med full true HD
- Höjd-bredd-förhållande: 16: 9
- Skärmdiagonal: 22 tum
- Två digitala ingångar för mikroskop och PC

KaVo Screen One – en högkvalitativ version med HD

- Plattskärm med true HD
- Höjd-bredd-förhållande: 16: 9
- Skärmdiagonal: 19 tum
- Två digitala ingångar för mikroskop och PC

DIAGNOcam Vision Full HD – innovation i den vackraste av former

Föreställ dig en kamera som ger dig tre kliniskt relevanta bilder för kariesdiagnostik – bilderna är alltid skarpa och levereras på mindre än en sekund. Nu är det möjligt – med DIAGNOcam Vision Full HD.

Trippeldiagnostik med ett klick

Oavsett om det är intraorala, genomlysnings- eller fluorescensbilder: DIAGNOcam Vision Full HD har kombinerat allt i en enhet.

Manövrering med anpassningsbara pekpaneler

De två pekpanelerna ovanför och nedanför kameran gör det enkelt att ta bilder av över- och underkäken. Dessutom kan funktionerna anpassas efter ditt arbetssätt samt för att passa vänster- eller högerhänta användare.

Lätt som en fjäder och perfekt balanserad

Kamerans låga vikt och perfekta balans gör att du kan arbeta i en ergonomisk och avlastande position.

Bildlägen som kan kombineras

Du väljer om du vill ta en intraoral bild, genomlysningsbild eller fluorescensbild – eller om du vill kombinera två eller tre exponeringslägen.


Alla bilder är i full HD

Tack vare HD-upplösningen på 1920 x 1080 pixlar kommer alla bilder som tas att ha en enastående skärpa.


Ta bilder på ett sätt som passar dig

Som ett alternativ till pekpanelen eller PC:ns mus kan du även ta bilder med fotkontrollen (tillval).


3-i-1

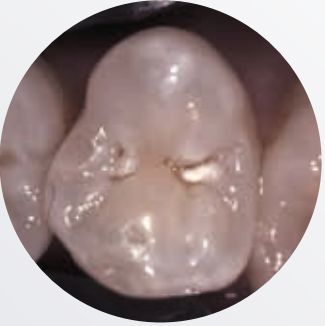

Intraorala bilder

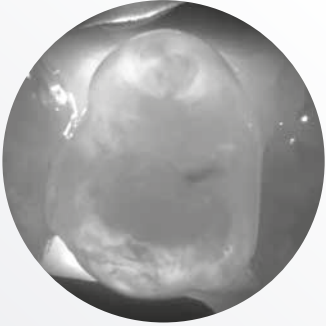

Genomlysningssbilder

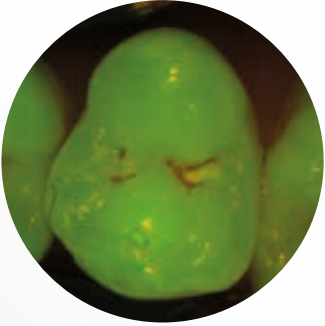

Fluorescensbilder

Se mer, visa allt: få en tre-i-ett-diagnos med ett knapptryck

Intraorala bilder för den första visuella kariesdiagnosen, djupa insikter i tandstrukturen med genomlysningsteknik och fluorescensbilder – allt med bara en enda bild i realtid och i full HD-upplösning på din skärm.

En spets för hela arbetsflödet

Du kan även använda spetsen för genomlysningssbilder för alla andra exponeringslägen. Tack vare spetsens patenterade design kommer du inte längre att slösa tid på att byta tillbehör mellan bildtagningar.

Enkel användning

Den integrerade LED-belysningen visar kamerans status: vitt för "i drift", blått för "standby" och rött för "fel".

Permanent autofokus



Jochen Kania
Tandläkare

"Många kameror har en autofokusfunktion. Men det tar vanligtvis för lång tid att fokusera tillräckligt bra för att få en kliniskt relevant bild. Den permanenta autofokusfunktionen på DIAGNOcam Vision Full HD skiljer sig från mängden. Den är alltid på – utan att du behöver trycka på en knapp. Den är automatiskt fokuserad hela tiden – jag får en skarp bild direkt, utan att behöva vänta.

Resultatet är fantastiskt: det är nästan omöjligt att ta en bild som inte är helt skarp – i full HD-kvalitet. Och det gäller oavsett om DIAGNOcam Vision Full HD används som en intraoral kamera, för genomlysningssbilder eller i fluorescensläge – eller om alla tre lägena kombineras i en och samma bild."



Den nya enheten för patientkommunikation – integrerad, enkel och effektiv


KaVo CONNECTbase har ett innovativt och enkelt arbetsflöde för patientkommunikation – du kan använda KaVo CONNECTbase för att informera dina patienter om deras tandhälsa på KaVo uniQa utan att behöva installera ytterligare programvara. Anslut bara kameran och sätt igång direkt. Bilderna visas direkt på behandlingsenhetens skärm och kan jämföras med tidigare sparade bilder.




Plug-and-play – smidiga processer på ett enkelt sätt

Kamerorna på KaVo uniQa-enheten ger dig omedelbar tillgång till dina kamerabilder och möjlighet att exportera dem via USB.

Det är minst lika enkelt att använda behandlingsenhetens pekskärm och fotkontroll, vilket betyder att du inte behöver lämna din arbetsplats under behandlingen eller avbryta en process i onödan.

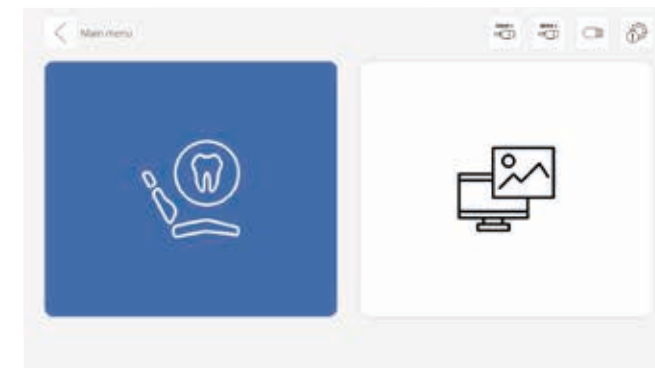


Vill du även använda andra källor? Inga problem. Använd en enkel funktion direkt på uniQa-tandläkarenheten för att visa olika HDMI-källor på behandlingsenhetens skärm.

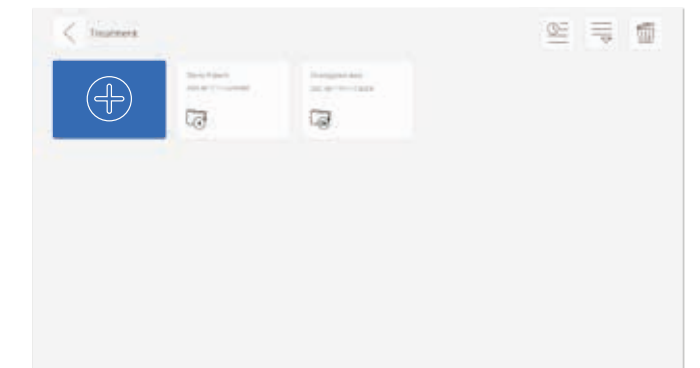


Gör behandlingarna till upplevelser

Du kan göra väntetider trevligare och vid behov skapa en inbjudande distraktion för patienterna med visuell underhållning direkt på KaVo uniQa-behandlingsenheten. Ett stort urval av media, inklusive en anpassningsbar välkomstskärm eller skärmläckare med ett stort urval av

foton eller bildspel, kommer att tilltala såväl yngre som äldre patienter. Naturligtvis kan du även använda din skärm för att visa eget material eller dela med dig av relevant information – i sann KaVo uniQa-anda.

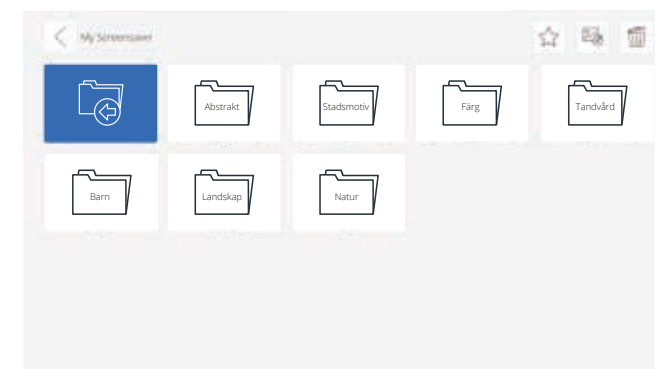

Du kan använda olika skärmbakgrundsteman för att matcha kliniken design.

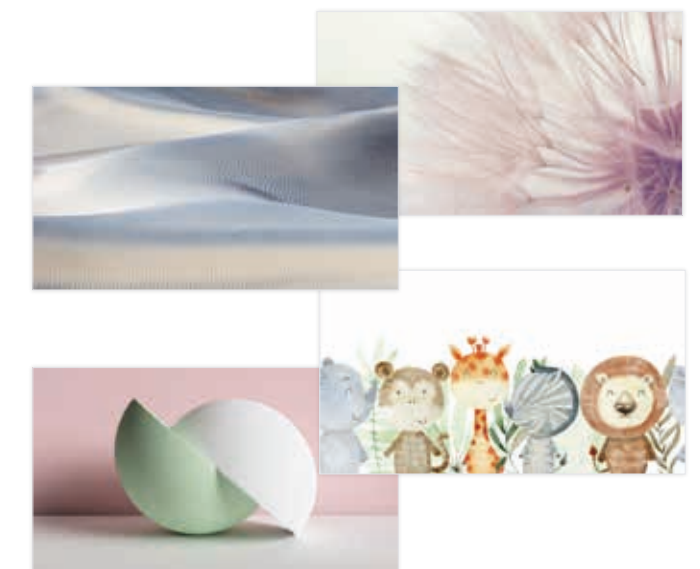



CONEXIO kopplar ihop det som hör ihop

En unik KaVo-filosofi gör det möjligt: CONEXIO banar väg för mer effektiva arbetssätt. KaVo-programvaran kombinerar programvara för patienthantering, 2D-röntgenbildarkiv, intraorala livebilder och ett snabbt och intuitivt gränssnitt. Få tillgång till alla patientdata direkt på pekskärmen på KaVo uniQa. Vill du lägga till mer data? Inga problem. Och bäst av allt: uppgifterna läggs till direkt i patientens journal.

Underlättar dina diagnoser – informerar din patient

Använd möjligheten att välja och jämföra bilder från olika källor. Allt du behöver för att visa patienten bilderna är tandläkarenheten på KaVo uniQa – inget tangentbord, mus, surfplatta eller PC.



En perfekt översikt: den kliniska övervakningsstatusen

Varje bild kan tilldelas en tand när upptäckterna registreras. Du kan ange en klinisk övervakningsstatus från "frisk" till "kritisk". Jämförelseläget gör det möjligt att utföra en förloppskontroll med äldre bilder av tanden eller bilder från andra källor medan diagnostiseringen fortfarande pågår.

Ett bra behandlingskoncept

Med CONEXIO är allt precis där du behöver det: direkt på din KaVo uniQa-tandläkarenhet. Det användarvänliga gränssnittet som du använder via uniQa-pekskärmen ger dig fullständig tillgång till patientfilen. Och om du inte har en hand ledig kan alla centrala CONEXIO-funktioner även styras och aktiveras med fotkontrollen. Mycket bekvämt och hygieniskt.



En jämförelse av KaVos patientkommunikationssystem

	KaVo CONNECTbase	KaVo CONEXIO
Produktinformation	Autonomt system – integrerat i KaVo uniQa	Programvaruinstallation på backend-datorn
Är programvaruinstallation på datorn nödvändig?	Nej	Ja
Automatisk integration av klinikens hanteringssystem	Nej (tillgängligt vid ett senare tillfälle)	Ja
Tandscheman och klinisk övervakningsstatus	Nej	Ja
Tillgång till innehåll (t.ex. skärmläckare, KaVo-teman, välkomstskärm)	Ja	Nej
Byte av källa direkt på behandlingsenhetens tandläkarenhet	Ja (2 x HDMI)	Nej
Bilder visas direkt på behandlingsenhetens skärm	Ja	Ja
Bildjämförelser med tidigare bilder	Ja	Ja
Automatisk bildöverföring	Ja	Ja
Användning	• Tandläkarenhetens pekskärm • Behandlingsenhetens fotkontroll	• Tandläkarenhetens pekskärm • Behandlingsenhetens fotkontroll • PC (mus, tangentbord)
Kameror	• KaVo ERGOcam One • KaVo DIAGNOcam • KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	• KaVo ERGOcam One • KaVo DIAGNOcam • KaVo DIAGNOcam Vision Full HD
Fjärråtkomst + uppdatering av behandlingsenhet	Ja (LAN)	Nej

ENKLA HYGIENRUTINER



Handtag, instrumentbrickor, fontänskålar, svängarmar och silikonmattor är lätta att ta bort och desinficera. Höljets övre och nedre delar är helt inneslutna för att förhindra att smuts kommer in i behandlingsenheten. Sugfiltren kan bytas på ett enkelt och säkert sätt tack vare det hygieniska handtaget.



Det är väldigt enkelt att rengöra KaVo uniQa: ta helt enkelt bort viktiga komponenter för desinfektion. Samtliga ytor är lätta att rengöra och spolningen av instrumenten samt rengöring och desinfektion av sugslangarna är automatiserad, vilket håller dig säker.

Praktisk intelligens möter säkrare hygien

Du kan förlita dig på pålitlig, automatisk rengöring och desinfektion av sug- och instrumentslangar. Hygienenheten är integrerad i KaVo uniQa. Du kan ansluta både sugslangar och instrumentslangar – mycket enkelt och med liten ansträngning. Hygienenheten kan tas bort och desinfekteras termiskt.

Vattnets kraft

Rening med vattnets kraft. KaVo uniQa kombinerar det automatiska HYDROclean-programmet för enkel, automatisk rengöring av amalgamseparator-, sug- och dränerings-systemen med instrumentspolningsprogrammen. Det gör att du kan undvika driftstopp och sänka kostnaderna för underhåll av behandlingsenheten.




Bakterierna har inte en chans

Skydda KaVo uniQas kablar från kontaminering. Vattenblocket med fritt vatteninlopp uppfyller DVGW-standardens stränga krav. Dessutom säkerställer permanent bakterieminskning med KaVo OXYGENAL 6 att inga mikroorganismer sprids vid normal användning. Med det intensiva bakterieminskningsprogrammet

("veckovist" rengöringsprogram) skyddar du inte bara dina patienter från mikroorganismer som kan bildas när enheten inte används, som under helger eller perioder då kliniken är stängd, utan säkerställer även att kyl- och sköljvätskorna är av bästa möjliga kvalitet. Säkerhet framför allt.

Automatiska spolningsprogram enligt RKI-riktlinjerna

Minimera riskerna i enlighet med specifikationerna från RKI – med de förprogrammerade rengöringsprogrammen blir upparbetningen av KaVo uniQa väldigt enkel. Oavsett om det är på morgonen, efter varje behandling, på kvällen eller en gång i veckan. På hygienfliken finns det anvisningar för hur du förbereder enheten. Sedan sköter programmen spolningen och rengöringen.

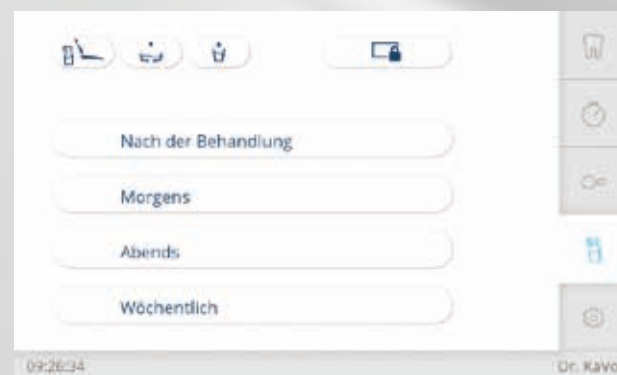

Skyddat vattenförsörjningssystem

Instrument och motorer från KaVo har en funktion som förhindrar återsug för att skydda vattenförsörjningssystemet. Funktionen förhindrar att förorenat sprayvatten sugs tillbaka in i behandlingsenheten.



Spara tid med färdigblandad KaVo DEKASEPTOL Gel. Gelen, som kan användas direkt, väter sugslangar och system och fäster på viktiga områden istället för att bara spolats igenom.



Ren glädje

DEKAmat har en integrerad DEKASEPTOL-flaska för standardiserad, effektiv rengöring och bakterieminskning i sugkanalerna. Den permanenta och intensiva bakterieminskningen i patientvattnet med OXYmat fungerar lika enkelt, eftersom OXYGENAL 6-flaskan också placeras i enheten. Respektive medel doseras automatiskt i lämplig dos. Det eliminerar den arbetskrävande och tidskrävande manuella bearbetningen och risken för felaktig dosering. Dessutom undviks kontakt med kemikalierna.

ENASTÅENDE TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING



Gör KaVo uniQa till ett personligt och unikt verktyg. Kombinera tillbehör efter dina önskemål – för ett mer individuellt och roligt arbetssätt.



Kraft och prestanda i optimal balans

Med ultraljudsscalern PiezoLED kan tandrengöring utföras med hög precision och på ett tidsbesparande sätt. Linjärt oscillerande titansonotroder säkerställer särskilt effektiv behandling. Tänder och tandkött förblir orörda även i filigranområden, eftersom cirkulära ljusemissioner ger dig optimal sikt. Arbeta med extrem precision och utan att bli trött tack vare den lätta, ergonomiska designen.

KaVo SONICflex är ett smart verktyg som kan användas för nästan alla indikationer. Tack vare de olika användningsområdena kan det bli ett av dina mest använda instrument: med fler än 50 spetsar som kan bytas med en enkel vridrörelse är det perfekt för alla tillämpningar, som profylaktiska behandlingar, endodonti, parodontologi, minimalt invasiv kariesbehandling, kirurgi eller dissektion.

Lev som du lär

När det kommer till instrument bör du inte nöja dig med något annat än det bästa.

KaVo MASTERmatic-serien täcker alla tillämpningar, ger dig den bästa sikten och optimal åtkomst till karies – vilket gör det möjligt för dig att behandla dina patienter med högsta kvalitet och precision, speciellt i kombination med den extremt kompakta, lätta och tystgående mikromotorn INTRA LUX KL 703 LED.

Tack vare SMARTdrive kan du arbeta effektivt i hastighetsintervallet 100 till 40 000 varv/min utan att bli trött.



Perfekt belysning för perfekt sikt

Använd KaVoLUX 540 LED via den intuitiva tandläkarenheten eller med kontaktfria handrörelser Du kan även aktivera och stänga av KaVo uniQa med enhetens automatiska positioner. KaVoLUX 540 LED är optimalt anpassad för uniQa, är fullständigt kompatibel med hygienkraven och ger dig den högsta KaVo-kvaliteten, lång livslängd och maximal behandlingskomfort.



15 000 lux och optimalt arbete

Ett vanligt problem är att komposit ofta härdar för snabb om operationsbelysningen inte dämpas. Men det är inte fallet med KaVoLUX 540 LED. Det innovativa COMPOsave™-läget (kompatibelt med ljusaktiverade restaureringsmaterial) filtrerar bort alla blå komponenter i ljuset, vilket saktar ner härdningen av fyllningsmaterialet. På så sätt kan ljushärdande material bearbetas långsamt utan att belysningen måste dämpas. Med en ljusstyrka på 15 000 lux har du alltid optimal sikt under behandlingar och får utmärkta resultat.

Naturligt ljus av högsta kvalitet



Kontaktfri användning



COMPOsave-läge



Perfekt passform

För dig som tandläkare är det extra viktigt att arbeta i en ergonomisk, hälsosam och bekväm ställning i varje behandlingssituation. Ingenting påverkar din hållning så mycket som arbetsstolen du sitter på varje dag. KaVo PHYSIO Evo och Evo F är framtagna för tandläkares och sköterskor behov och arbetsflöden.



Ergonomi och komfort in i minsta detalj

Tack vare separata anpassningsfunktioner är det enkelt att anpassa sitsen och ryggstödet var för sig efter dig och din behandlingsstil. Rygg- och sittedynorna på KaVo PHYSIO Evo är ergonomiskt formade. Upphöjningen i mitten av sittedynan ger en stabil sits och förhindrar att du halkar till vid snabba, korta rullande rörelser. Det rundade lårstödet ger mycket rörelsefrihet. Det fjädrade ryggstödet ger hela tiden stöd till dina ryggmuskler, speciellt vid ländkotan, och håller dig därmed skyddad hela tiden. Smidiga arbetsprocesser och största möjliga sittkomfort är en självklarhet för varje behandling – för din hälsa och en stressfri arbetsmiljö.

Ett exceptionellt koncept

Behandlingsstolen KaVo PHYSIO Evo har fått en kvalitetsstämpel av föreningen Healthy Back Campaign (AGR). Den oberoende, multidisciplinära expertgruppen delar ut den här utmärkelsen baserat på strikta kriterier för ergonomi och hälsa.




Utrustningsalternativ

	TM	S	C	T		TM	s	C	T
Patientstol					Brickhållare för brickstöd	○	○	○	○
Mjuk dyna	●	●	●	●	Svängbar samt höj- och sänkbar	●	●	●	●
Mjuk KaVo RELAXline-klädsel	-	-	-	-	Avtagbar instrumenthållare	●	●	●	●
					Val av bricka	●	●	●	●
					Kort arm	x	x	x	x
Ryggstöd									
Lutning (optimerad)	●	●	●	●					
					Enhet				
Nackstöd					Fontänskål i porslin	●	●	●	●
2-ledad med vridbart vrede	●	●	●	●	Fontänskål i rökgrått glas	○	○	○	○
Tvåledat med tryckknapp	○	○	○	○	Hygienenhet	●	●	●	●
Komforthuvuddyna	○	○	○	○	Permanent bakterieminskning ¹	●	●	●	●
					Ytterst noggrann bakterieminskning ¹	●	●	●	●
Armstöd					HYDROclean (spolningssystem)	●	●	●	●
Vänster	○	○	○	○	DEKamat™ och OXYmat	●	●	●	●
Höger	○	○	○	○	Varmvattenberedare	○	○	○	○
					VACUstopp	●	●	●	●
					Trådlös fotkontroll	○	○	○	○
Tandläkarenhet									
Pekskärm	●	●	●	●	Försörjningssystem				
SMARTdrive	●	●	●	●	DVGW-vattenblock	●	●	●	●
Fem instrumenthållare	●	●	●	●	DVGW-vattenflaska ²	○	○	○	○
Sex instrumenthållare	○	○	○	○	Kompakt vattenblock ²	○	○	○	○
Avtagbar instrumenthållare	●	●	●	●	Enhetsport för tillbehör	○	○	○	○
Turbinslang	○	○	○	○	Vakuumkontrollventil	○	○	○	○
INTRA LUX Motor KL 703 LED™	○	○	○	○	CENTRAMat	○	○	○	○
Integrerad vridmomentskontroll (endo)	○	○	○	○					
Ultraljudsscalern PiezoLED™	○	○	○	○	Avfallssystem				
Scalern SONICflex™	○	○	○	○	Utvändig våtsug	●	●	●	●
Trefunktionsspruta	●	●	●	●	DÜRR-amalgamseparator	○	○	○	○
Flerfunktionsspruta	○	○	○	○	Automatisk DÜRR-separator	○	○	○	○
Fysiologisk koksaltlösning	○	○	○	○					
Kirurgisk motor S600 LED	○	○	○	○	Operationsbelysning				
Sprayvärme för instrument	○	○	○	○	KaVoLUX 540 LED	○	○	○	○
USB-gränssnitt	○	○	○	○	Monteringsstolpe för belysning	○	○	○	○
Pneumatisk broms för armsystem	-	○	-	○	Adapter för monteringsstolpe för belysning (t.ex. Intraoral scanner)	○	○	○	○
Brickhållare för två standardbrickor	●	●	-	●					
Servicebord 1568 för två standardbrickor	-	-	○	-					
					Patientkommunikation				
Sköterskeenhet					KaVo CONNECTbase	○	○	○	○
Kapacitiv pekskärm	●	●	●	●	CONEXIO	○	○	○	○
Fem instrumenthållare	●	●	●	●	KaVo Screen One	○	○	○	○
Sug för spraydimma	●	●	●	●	KaVo Screen HD	○	○	○	○
Salivsug	●	●	●	●	KaVo ERGOcam One	○	○	○	○
2. Salivsug	○	○	○	○	KaVo DIAGNOcam	○	○	○	○
Trefunktionsspruta	○	○	○	○	KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	○	○	○	○
Flerfunktionsspruta	○	○	○	○					
Polymerisationshandenhet Satelec Mini LED	○	○	○	○					

● Utrustning i serien | ○ Tillvalsutrustning | x Måste väljas | - Inte tillgängligt
¹ Endast i anslutning till DVGW-vattenblocket och DVGW-vattenflaskan | ² Till ett reducerat pris

Metallskimrande lackfärger

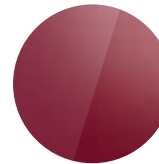

MidnattsblåRökblåSilverblåSilverBärKarmosinrödChokladbrun

Lackfärger




OrangeÄppelgrönHavsblåVit

Obs! Tryckfärgerna återger inte den sanna färgen.
(Be om en KaVo-färgkarta!)









Klädselfärger som är exklusiva för KaVo uniQa





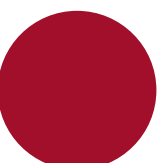


ChilirödAprikosSidengrå

Klädselfärger

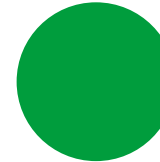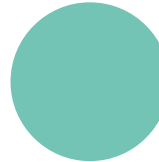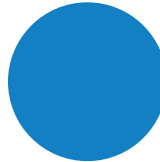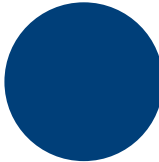
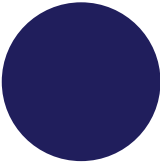
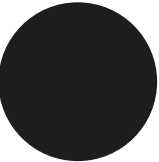


SvartMidnattsblåRökblåHavsblåMintGrönskaSmaragdgrön

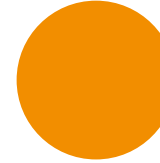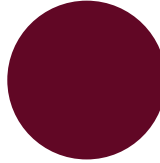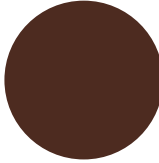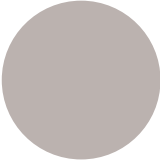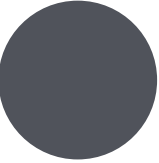

AntracitgråPärlgråChokladbrunKarmosinrödBärRubinrödOrange

Mjuk RELAXline-klädsel

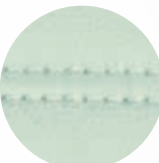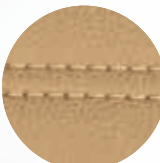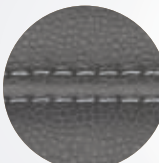

GraphiteCashmereAgave

Dental Excellence inom alla områden



Utrustning för din klinik

Behandlingsenheter, behandlingslampor, tandläkarstolar, patientkommunikationssystem och ytterligare tillbehör för tandläkarkliniker från KaVo.



Instrument

Hand- och vinkelstycken, turbiner, putsvinkelstycken och små enheter för alla tillämpningar – från diagnostik via profylaktiska behandlingar till restaurering, kirurgi, endodonti och instrumentvård samt underhåll.

Produkterna, utrustningen och tjänsterna som visas och beskrivs i den här katalogen är inte tillgängliga i alla länder. All information var korrekt vid trycktilfället. KaVo Dental GmbH tar inget ansvar för eventuella färg- eller formavvikelser jämfört med bilderna eller eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar i broschyrens innehåll. Nytryck, även av delar av den här broschyren, är endast tillåtet med tillstånd av KaVo Dental GmbH.

KaVo och uniQa är registrerade varumärken som tillhör KaVo Dental GmbH.