

KaVo PIEZOlux®.

Zahnstein-Entfernungshandstück.



Mit Ultraschall gegen Zahnstein.



KaVo. Dental Excellence.

Ultraschallsauber.

Gründliche und gleichzeitig schonende Zahnsteinentfernung? Mit dem 30 kHz-Ultraschallgerät KaVo PIEZOLux geht das ganz einfach. Das hochfrequente Zahnstein-Entfernungshandstück fällt in Ihrer Hand kaum ins Gewicht. Und ist fast lautlos.

Aber nicht nur die mühelose und schonende Zahnsteinentfernung klappt mit KaVo PIEZOLux hervorragend. Mit dem zusätzlichen Spitzen-Set KaVo PIEZOLux paro ist auch die schonende und effiziente Reinigung von subgingivalen Parodontaltaschen bis neun Millimeter Tiefe problemlos möglich. Und Inlays können Sie ebenfalls mit KaVo PIEZOLux sanft und präzise einvibrieren – mit KaVo PIEZOLux cem, der Inlay-Spitze mit Kunststoffaufsatz.

KaVo PIEZOLux. Mühelos für Sie, schmerzlos für Ihre Patienten.



Volle Ausleuchtung des Arbeitsfeldes dank zweier konvexer Glasstäbe.

Korrekte Spitzenbefestigung mit dem mitgelieferten Drehmomentschlüssel.

Für Sterilisation, Desinfektion und Reinigung lässt sich die Hülse leicht abnehmen.



Unerhört leise:
Schwingfrequenz von ca. 30 kHz.

Integriert in die KaVo Behandlungseinheit.
Kein zweiter Fußanlasser notwendig,
wertvolle Ablagefläche bleibt erhalten.

Genauere Dosierung der Spraymenge
mit dem Drehring.

Lieferumfang:
PIEZOLux Handstück inkl. Schlauch
und Einbaumodul, Drehmoment-
schlüssel, 3 Spitzen PIEZOLux scaler
und Spitzen-Prüfschablone.



Die drei Anwendungsgebiete von KaVo PIEZOLux® mit den jeweils spezifischen Spitzen:

Spitze „Sichel“ Nr. 9
(REF 0.571.5822)



Spitze „Perio“ Nr. 10
(REF 0.571.5832)



Spitze „Universal“ Nr. 11
(REF 0.571.5852)



PIEZOLux scaler*
für die Zahnsteinentfernung.
Mühelos gründlich.


Spitze „Paro“ Nr. 63
lang, gerade
(REF 1.000.2222)



Spitze „Paro“ Nr. 64
lang, links
(REF 1.000.2223)



Spitze „Paro“ Nr. 65
lang, rechts
(REF 1.000.2224)

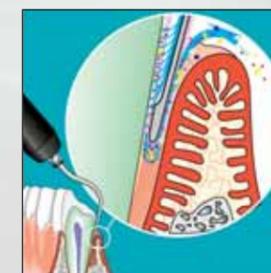


PIEZOLux paro*
für die Parodontologie.
Schonend reinigen.

Spitze „Inlay“ Nr. 47
(REF 0.571.6961)



PIEZOLux cem*
zum Einsetzen von Inlays. Zähflüssiger
Komposit verflüssigt sich kurzzeitig.

*KaVo PIEZOLux-Spitzen sind auch bei KaVo SONOsoft einsetzbar.

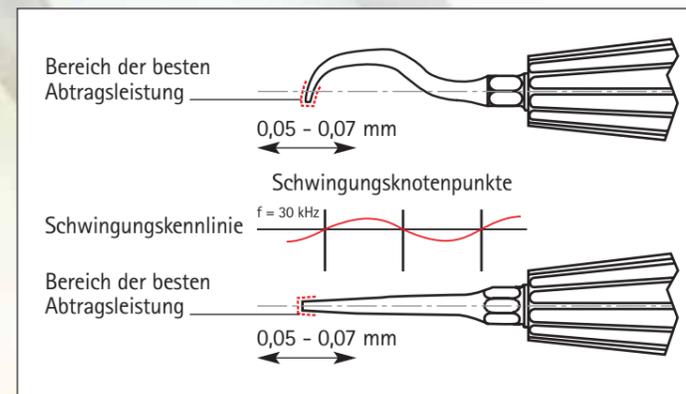

Die Bewegung der Spitze erfolgt linear zur Handstückachse. Optimale Abtragsleistung mit einer Schwingweite zwischen 0,05 und 0,07 mm bei einer Schwingfrequenz von 30 kHz.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo. D-88400 Biberach/RiB
Telefon +49 73 51 56-0 · Fax +49 73 51 56-1488
Internet: www.kavo.com