



DANISH
DESIGN
- MADE IN
DENMARK

FLEKSIBILITET
OG INDIVIDUELL
DESIGN GJØR DERES
BEHANDLINGSUNIT
TIL EN AKTIV
MEDSPILLER



KVALITET ER IKKE
EN OVERVEIELSE
KVALITET ER
LØSNINGEN




UnicLine
- FEEL THE DIFFERENCE

FULL KONTROLL – MED FOTEN

Den patenterte runde fotkontrollen kan betjenes fra alle sider med høyre eller venstre fot, og frigjør deg fra fastlåste arbeidsposisjoner.


Fotkontrollen regulerer hastighet og intensitet på de valgte instrumenter. Med trykk på fotkontrollens mellomring aktiveres: sprayvalg, kraftig manuell chipblow og vender omdreiningsretning på micromotor. Toppen kan tilkobles operasjonslampe, av/på eller assistentcall.

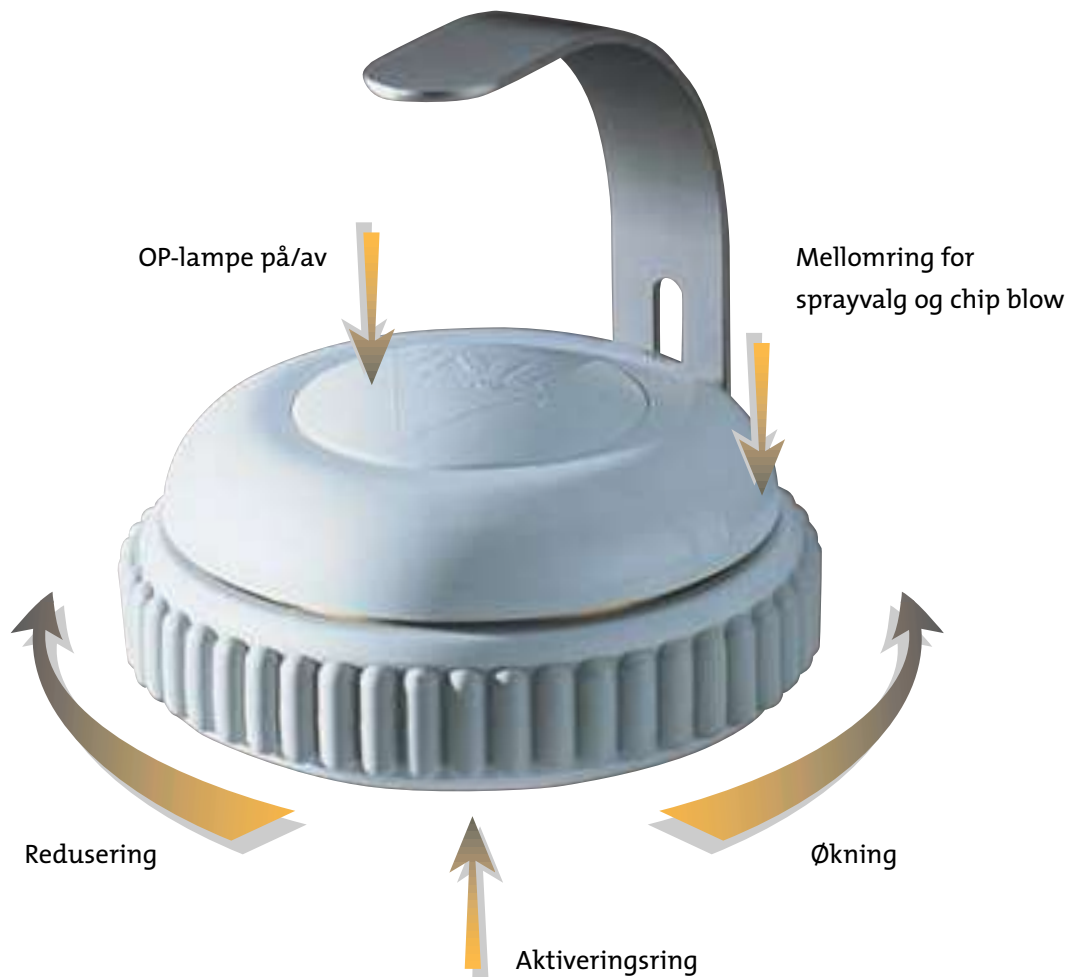

UnicLine 5D kan også leveres med en kovensjonell variabel fotkontroll.



LA MULIGHETENE
STÅ ÅPNE
- HVER DAG

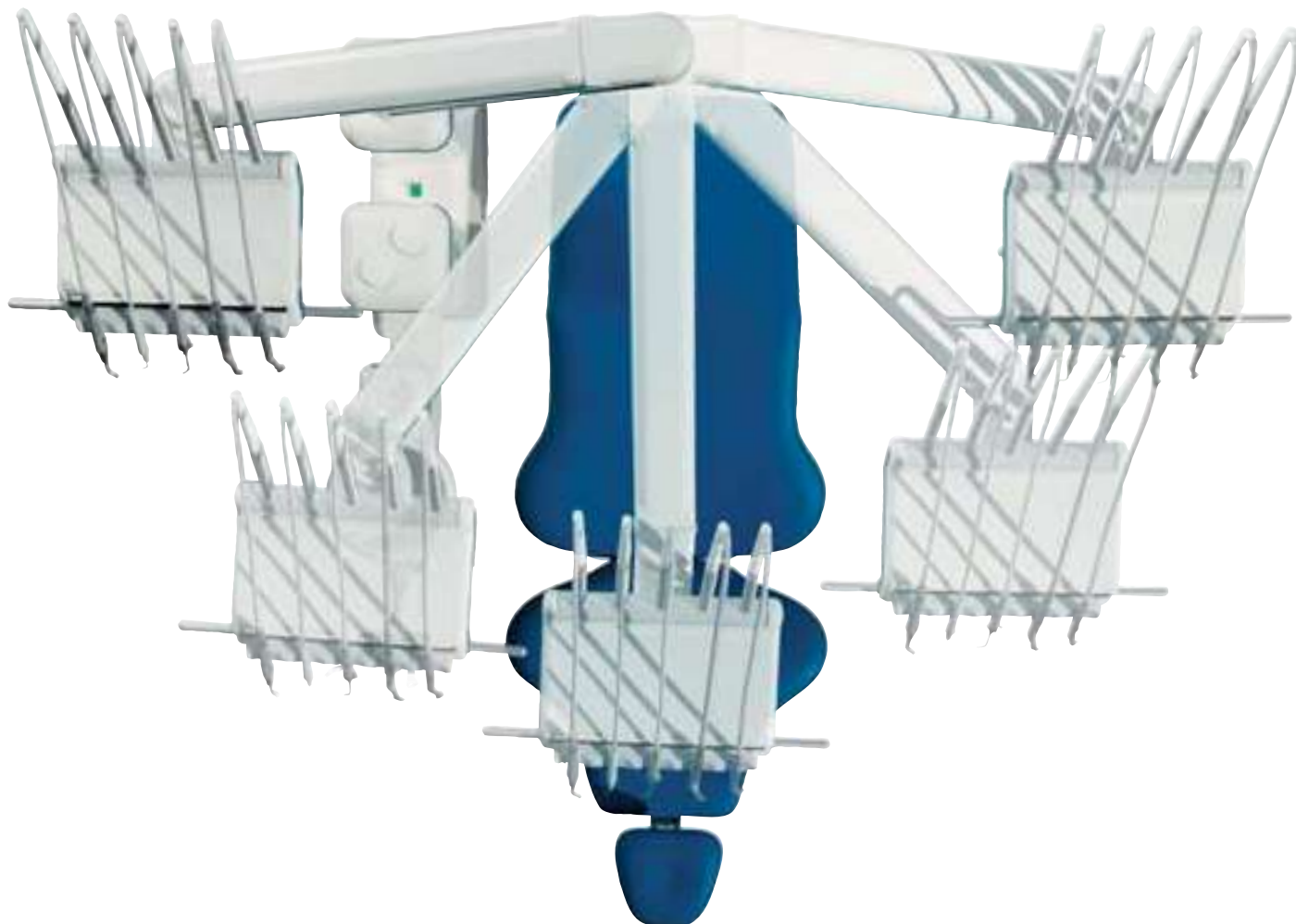



Overblikk

Multiinfodisplayet gir deg raskt overblikk over den aktuelle innstillingen.

Individuell innstilling

De enkelte instrumenters arbeidsvinkel kan individuelt innstilles.


Valgfrihet

UnicLine 5D leveres med 3 til 6 balans eller underopphengte instrumenter individuelt plassert. Du kan velge mellom 25 instrumentvarianter, som styres via den patenterte fotkontrollen.

Finger Touch

Tastaturet med hjelpefunksjoner er plassert på instrumentbordet, og styrer timerfunksjonen, herdelampetid, assistent-call og fontenefunksjoner.

Videre kan micromotoren testes.

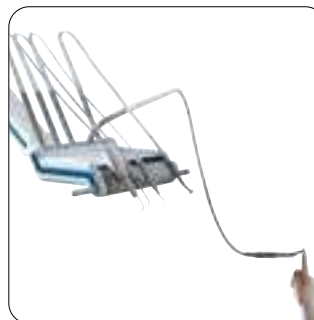

Ergonomi

I balanseopphengget er de enkelte instrumentene individuelt avbalansert, og de lange silikonslangene gir ergonomisk riktig arbeidsmulighet.

VI HAR ALLE FORSKJELLIGE IDEER
OG ØNSKER - FLEKSIBILITET HANDLER
BLANT ANNET OM TILPASNING.
DET ER DERFOR HVER ENKELT
UNIT ER INDIVIDUELT FREMSTILT,
NETTOPP FOR DEG






Instrumentgjennom- skylling


For å sikre frisk vanntilførsel kan UnicLine 5D leveres med automatisk system for vanngjennomskylling av instrumentene.

Hygienisk vannutlufting


UnicLine 5D kan leveres med hygienisk vannutlufting av unitens vannkanaler. Dette begrenser algevekst.

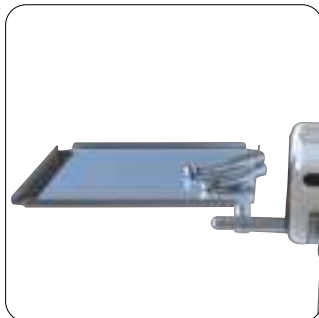

De lett avtagbare aluminiumshåndtakene kan autoklaveres.

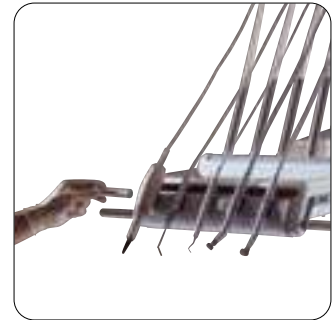

Instrumentunderlaget er lett å ta av.

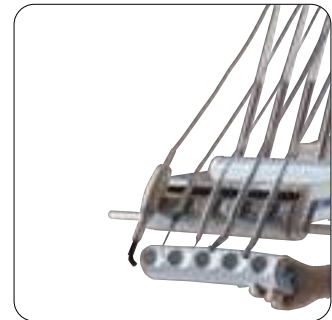

UnicLine 5d
- enkelt brettbord
- dobbelt brettbord
- røntgenbetrakter



HVORFOR GÅ PÅ KOMPROMISS
MED MATERIALER, NÅR DET I
DAG FINNES EN BEHANDLINGS-
UNIT I ALUMINIUM
- EN SIKKERHET FOR
LIVSLANG KVALITET



UnicLine multimedia
UnicLine 5D med monitor
og intra oralt kamera for
pasientvennlig fremvis-
ning av intraorale bilder,
video, digitalt røntgen
eller annen form for
IT-medier.



FLEKSIBILITET HANDLER BLANT ANNET OM TILPASNING





UNICLINE 5D
- ET ELEGANT,
FUNKSJONELT OG
TIDLØST DESIGN,
LAGET I MILJØ-
VENNLIGE
MATERIALER





UNICLINE 5D
KAN OMSTILLES
FRA HØYRE
TIL VENSTRE
HENDT TANN-
BEHANLING




LYS MED INNEBYGGET STABILITET



UnicLine lampen gir et optimalt behandlingslys, med lampehodet plassert på en selvbalanserende fjærarm, som sikrer en stabil posisjon.

FRI PLASSERING

Cart versjonen tilbyr de samme funksjoner som UnicLine 5D. Behandlingsuniten er bygd opp på en solid aluminiumsprofil med skjulte hjul. Arbeidshøyden på instrumentbordet kan manuelt justeres til både sittende og stående behandling.

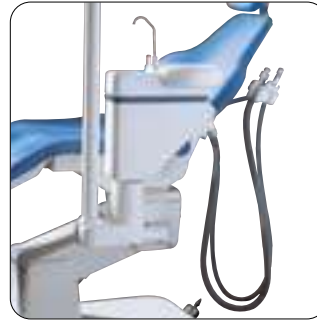

Stolmontert fontene
Stoladapteren passer til UnicLine pasientstol og kan monteres med svingbar fontene med sug, ekstra brettbord og operasjonslampe, samt fleksibel teleskoparm som optimalt tilpasses, uansett om du arbeider alene, eller med assistent.



UnicLine Cart



UnicLine Stander


PASIENT HYGIENE

UnicLine 5D kan leveres med automatisk sugeslangerenssystem, som aktiveres med et enkelt trykk. Heretter desinfiseres sugeslangene og man er klar til en ny pasientbehandling.

Under behandlingen kan sugeslangene desinfiseres kontinuerlig (eller bare med kaldt vann).



UnicLine 5D leveres med stengbare sugekanyler, eller med hygieniske aluminiums sugekanyler (til kirurgi).

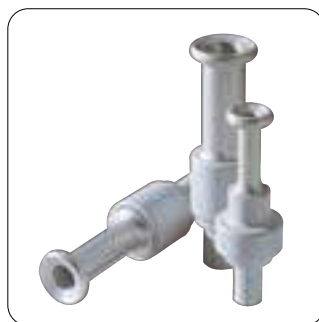



FLEKSIBILITETEN

UnicLine 5D leveres med fleksibel teleskoparm, som er optimalt tilpasset, uansett om du arbeider alene, eller med assistent. Kan leveres med flerfunksjonssprøyte eller LC-herdelampe.



PLASSKOMFORT

Fonteneenheten er dreibar og gir maksimalt med plass for både en og to assistenter. Fontenen kan tas av for rengjøring.





Multiarmlene

UnicLine pasientstol kan leveres med et eller to armlener, som lett kan fjernes.



Joystick

Valgfri plassering av opp til 3 individuelle fotkontroller gir optimal bevegelsesfrihet for deg og din assistent.



Enkel rengjøring

Stoltrekktet kan enkelt taes av for rengjøring.

VALGFRIHET



UnicLine pasientstol leveres som standard med soft stoltrekk i 9 valgfrie farger, eller som spesialvalg med Supersoft stoltrekk i 4 valgfrie farger.

PASIENTKOMFORT

Kompensasjon i rygg/setebevegelse
samt den integrerte arm – og armlenet
sikrer at pasienten sitter behagelig
under hele behandlingen.




Stabil posisjon
Den dobbelt innstillbare
nakkestøtten sikrer stabil
posisjon av pasientens
hode, både for
barn og voksen.



UNICLINE MOBILE – KOMPLETT UNIT

Fullt utrustet for såvel mobil som
stasjonær tannlegebehandling.

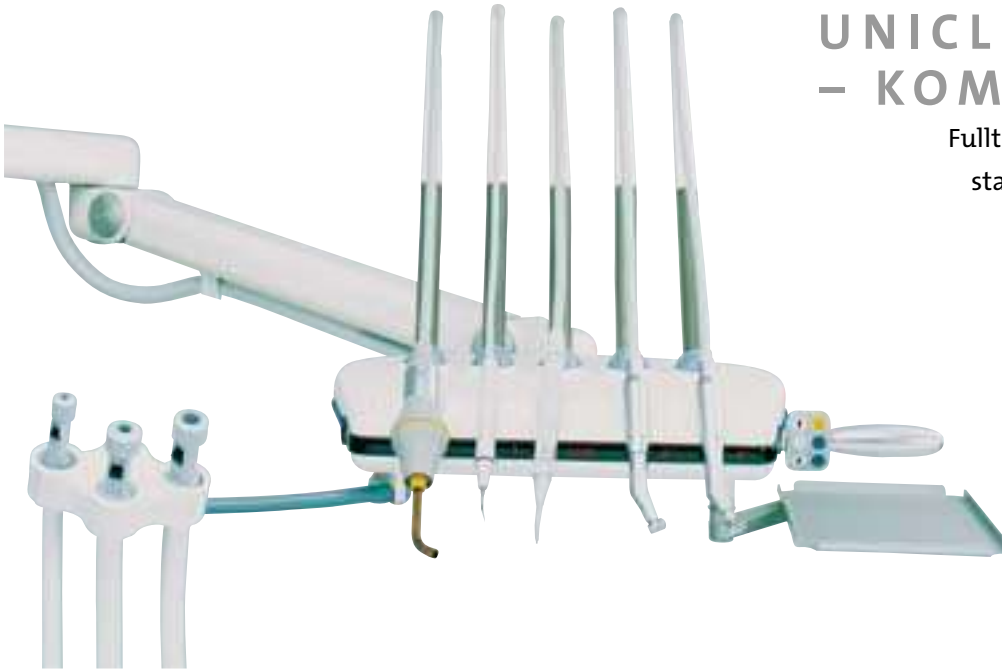

Instrumentbord med 3-veissprøyte,
2 mikromotorer, scaler og herdelampe.
Unitdelen inneholder amalgamutskiller,
kompressor samt separate beholdere
for ferskvann og avløpsvann.
Kobles kun til vanlig 220V.




UNIT, INSTRUMENTBORD,
OPERASJONSLAMPE,
PASIENTSTOL OG
RØNTGEN



heka*dental*



Heka Dental ApS
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj, Denmark
Phone +45 43 32 09 90
Fax +45 43 32 09 80
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.dk

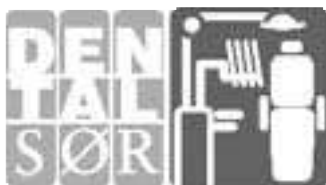

Dental Sør AS
Serviceboks 901, 4509 Mandal
Telefon 38 27 88 88
Fax 38 27 88 89
post@dentalnet.no

Det tas forbehold om
endringer og trykkfeil,
samt fargegjengivelse.